

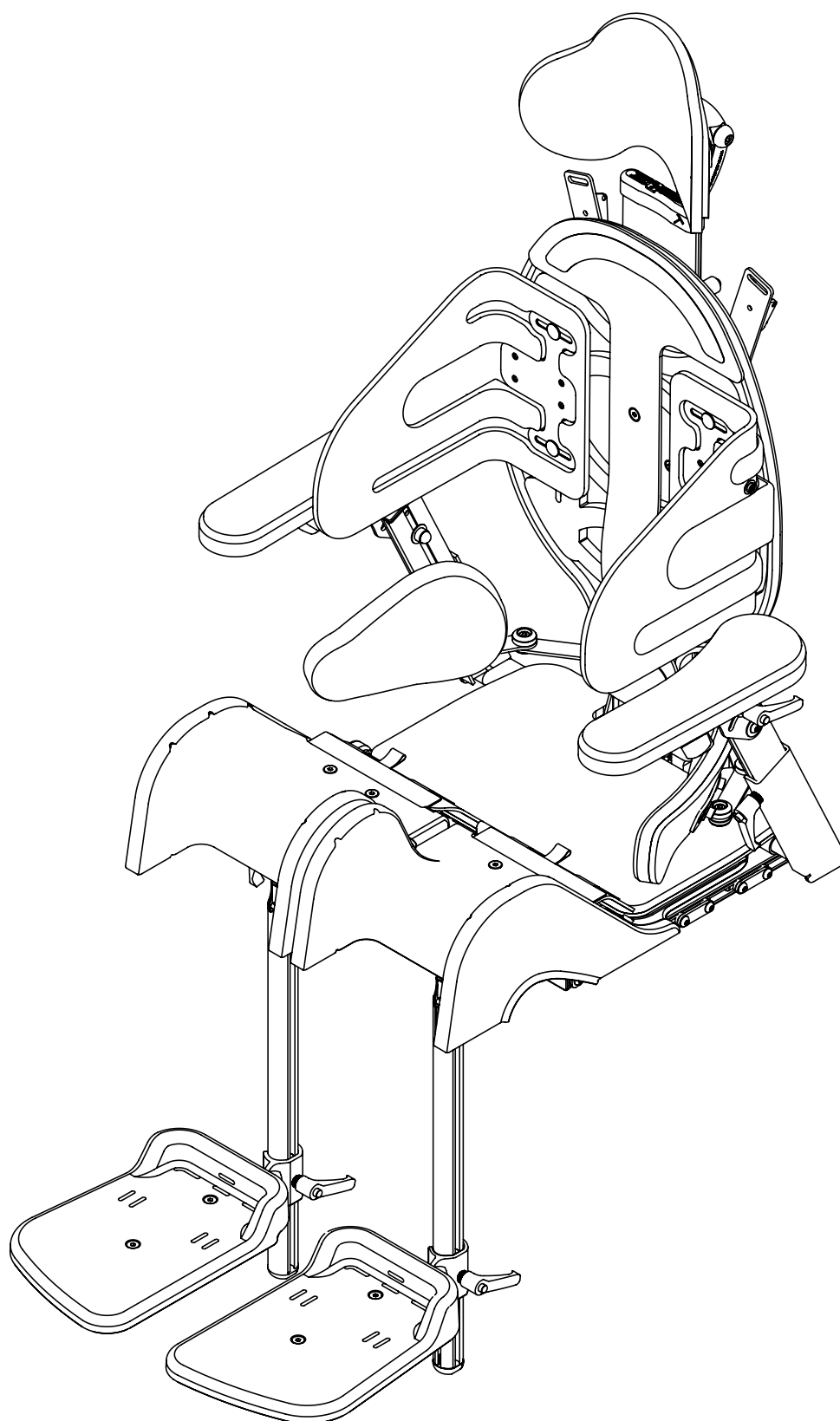



Table des matières

Consignes de sécurité	5	Accoudoirs à partir du siège	23
Introduction	5	Montage des accoudoirs	23
Repose-tête	7	Régler la largeur de l'accoudoir	23
Montage du repose-tête	7	Régler la hauteur de l'accoudoir	23
Montage du repose-tête	7	Régler l'angle de l'accoudoir	23
Régler la hauteur du support du repose-tête ...	7	Régler l'angle latéral	23
Régler la position du repose-tête	7	Coussin	23
Montage du support du bandeau frontal	7	Accoudoirs à partir du dossier, fixes	25
Dossier	9	Montage des accoudoirs fixes	25
Installation du dossier	9	Régler la largeur	25
Régler la hauteur du dossier	9	Régler la hauteur de l'accoudoir	25
Régler l'angle du dossier	9	Régler l'angle de l'accoudoir	25
Régler le support latéral	9	Régler l'angle latéral	25
Régler le support lombaire	9	Coussin	25
Support latéral	11	Accoudoirs à partir du dossier, repliables	27
Montage du support latéral	11	Montage des accoudoirs repliables	27
Support latéral pliable	11	Régler la largeur de l'accoudoir	27
Support latéral renforcé	11	Régler la hauteur de l'accoudoir	27
Le siège	13	Régler l'angle de l'accoudoir	27
Régler le siège	13	Régler l'angle latéral	27
Régler la largeur du siège	13	Pliage de l'accoudoir	27
Longueur des jambes	15	Harnais de sécurité	29
Régler le plateau d'ajustement de		Placer le support de montage inférieur	29
la profondeur	15	Régler le support de montage inférieur	29
Abduction et adduction	15	Placer le support de montage supérieur	29
Coussin chauffant	16	Régler le support de montage supérieur	29
Coussin chauffant	16	Autre support de montage inférieur	29
Montage des éléments chauffants	16	Guidon de poussée	31
Les éléments chauffants	16	Montage du guidon de poussée	31
Batterie	16	Régler la hauteur	31
Charger la batterie	17	Support de bras	33
Support de hanches	19	Montage du support de bras	33
Montage du support de hanches	19	Régler la hauteur	33
Réglage du support de hanches	19	Régler la largeur	33
Ceinture de hanches	21	Housse du coussin	33
Régler le support de la ceinture de hanches ...	21		
Montage de la ceinture de hanches	21		


Tablette, fixe	35
Montage de la tablette	35
Changer de trou de montage	35
Tablette, pliable	37
Montage de la tablette	37
Déplier et rabattre la tablette	37
Tablette, supports de montage renforcés	39
Montage de la tablette renforcée	39
Régler la hauteur	39
Repose-jambe	41
Montage des repose-jambes	41
Régler la hauteur	41
Régler la largeur	41
Repose-pied	43
Montage du repose-pied	43
Autre façon de monter le repose-pied	43
Butée de sécurité	43
Régler l'angle du genou	43
Régler l'angle de la cheville	43
Supports des repose-pieds	45
Support de repose-pied fixe	45
Support de repose-pied flexible	45
Repose-pied repliable	45
Support articulé	45
Siège plat	47
Montage du siège plat	47
Monter le dispositif d'assise sur un cadre	49
Montage sur un cadre	49
Montage avec un système d'adaptation	51
Transport dans un véhicule	52
Instructions pour le transport en voiture	52
Crash test : testé et approuvé	52
Service clientèle	53

Instructions d'entretien	54
Intervalles entre les entretiens	54
Instructions de nettoyage et de lavage	54
Le vérin à gaz doit être activé régulièrement	54
Outils	54
Garantie.....	55
Combinaisons	55
Pièces de rechange	55
Remise en état	55
Marquage	55
Recyclage	55
Récapitulatif et suivis	56
Adaptation et sur-mesure	57
Lignes de conduite et recommandations	57
Adaptations autorisées pour le Sharky Pro	57
Conditions de vente	58
Garantie	58
Système de garantie	58
Retourner le produit	58
Données techniques	59
Données de l'utilisateur	59
Données du produit	59

Détails communs

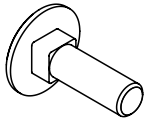


Vis à collet carré

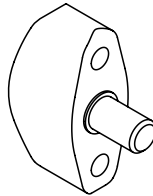


Bouton de serrage
Filetage extérieur




Bouton de serrage
Filetage intérieur

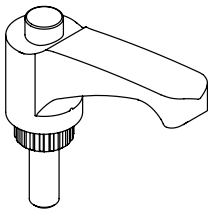

Levier

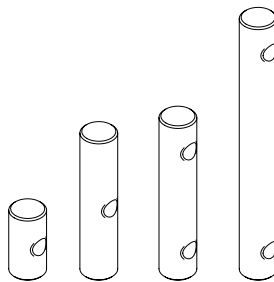

Cylindre
Différentes tailles

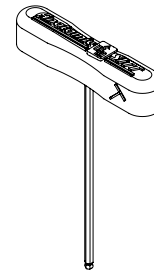

Clé Allen
Intégrée à l'arrière du dossier

Clé Allen

L'outil dont vous avez besoin pour effectuer les réglages (une clé hexagonale de 4mm) se trouve au sommet à l'arrière du dossier.

Consignes de sécurité

Introduction

Avant de pouvoir bénéficier de tous les avantages du Zitzi Sharky Pro, il est important que vous lisiez attentivement ce manuel. Ceci vaut pour tous les accompagnateurs de l'utilisateur. Le produit est conçu pour les utilisateurs ayant besoin d'un confort d'assise particulier et convient à différents types de diagnostics. Les réglages du Zitzi Sharky Pro doivent être effectués, de préférence, par des personnes qualifiées dans le domaine médical.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Anatomic SITT AB.

Champ d'application

Le produit est destiné à être utilisé en tant que dispositif d'assise conjointement avec un des châssis produits par Anatomic SITT AB. Si vous souhaitez l'utiliser avec un autre type de châssis, veuillez contacter Anatomic SITT AB.

Communication

Le Zitzi Sharky Pro et ses accessoires sont des produits marqués « CE ». Un numéro de série unique se trouve sur l'étiquette située près du vérin à gaz dans le siège. Ce numéro de série doit être mentionné dans chaque communication concernant le produit.

Crash test

Le Zitzi Sharky Pro a été soumis à un crash test et est conforme à la norme ISO 16840-4. Pour plus d'informations, voir page 52.

Ce produit est fabriqué par Anatomic SITT AB

Boîte postale Anatomic SITT AB, Box 6137, SE-600 06 Norrköping (Suède)


Adresse Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping (Suède)

Téléphone +4611-161800

Fax +4611-162005

Email info@anatomicsitt.com

Web anatomicsitt.com, youtube.com/anatomicsitt

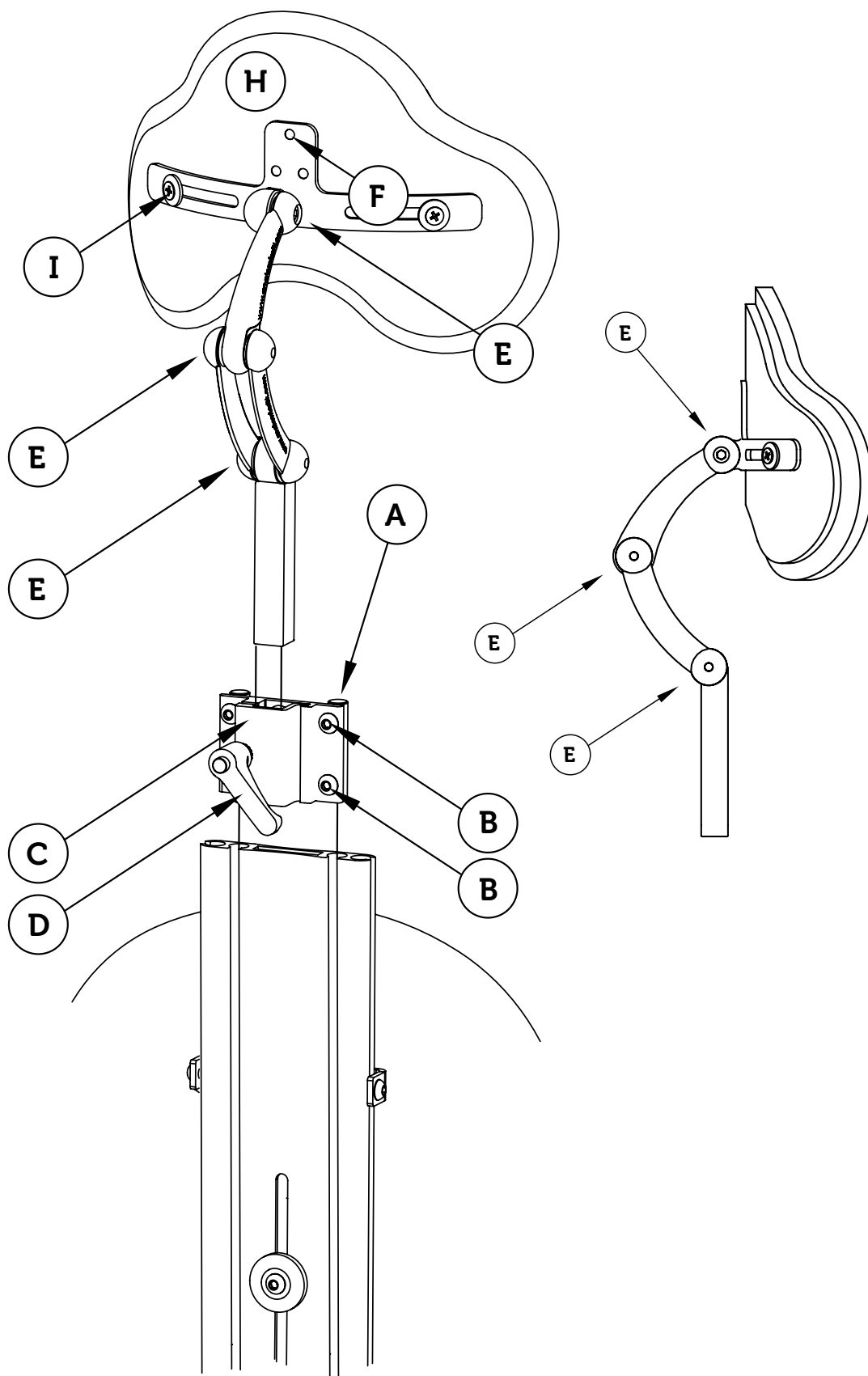

Repose-tête

Montage du support du repose-tête

Avant de pouvoir monter le support du repose-tête, vous devez d'abord enlever la clé Allen et, si nécessaire, les éventuels accessoires montés préalablement.

Faites glisser le support du repose-tête (A) dans les rails au dos du fauteuil. Une fois que la position du support convient, resserrez les quatre vis (B).

Montage du repose-tête

Faites glisser la barre du repose-tête dans le support (C) et resserrez le levier (D) une fois que le repose-tête se trouve dans la position souhaitée.

Régler la hauteur du support du repose-tête

Desserrez les vis (B) et déplacez le support du repose-tête jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. Resserrez les vis (B).

Régler la position du repose-tête


Pour régler le bras du repose-tête, desserrez la vis (E) du segment que vous souhaitez régler. Une fois le bras en position souhaitée, resserrez la vis (E).

Pour régler la hauteur du repose-tête, desserrez le levier (D) et placez le repose-tête à la hauteur souhaitée. Resserrez le levier (D).

Montage du support du bandeau frontal

Avant le montage du support, vous devez enlever le repose-tête (H). Pour ce faire, dévissez les deux vis (I).

Placez le support du bandeau et fixez-le avec les vis fournies (F). Pour plus de précisions concernant la façon de monter le support du bandeau, veuillez consulter les instructions correspondantes.

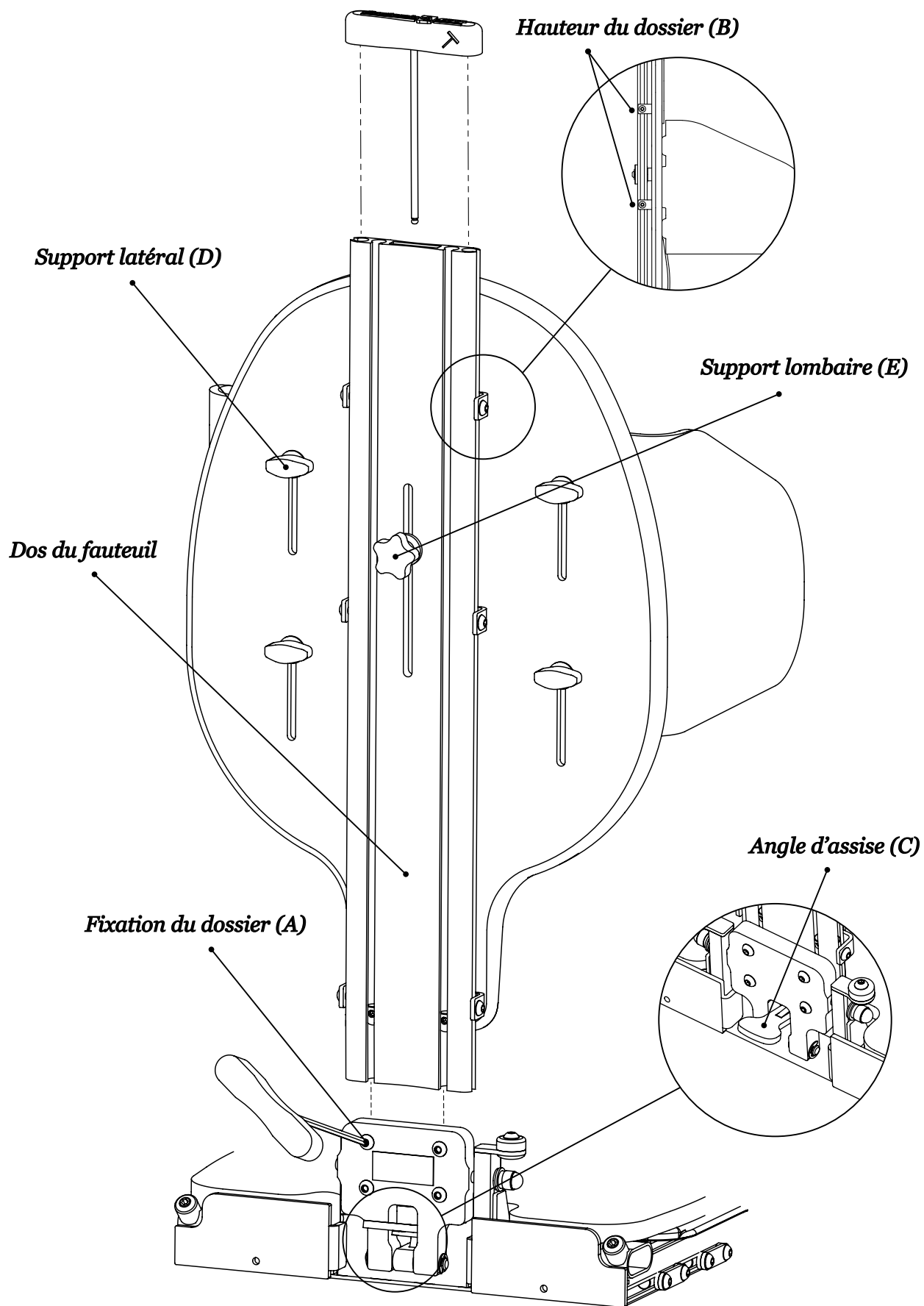

Dossier

Installation du dossier

Le système de fixation du dossier se compose de 4 vis (A) et de deux cylindres. Faites glisser les cylindres dans les rails du dossier. Ensuite, resserrez les 4 vis (A) à l'aide de la clé Allen.

Le dossier se trouve automatiquement dans la bonne position grâce aux arrêts déjà montés.

Régler la hauteur du dossier

Pour régler la hauteur du dossier, desserrez les vis (B) à l'aide de la clé Allen. Placez le dossier à la hauteur souhaitée, puis, une fois que la hauteur convient, resserrez les vis (B).

Régler l'angle du dossier

Placez le levier d'activation (C) en position active en le levant au maximum puis en le repoussant dans l'encoche.

Pour régler l'angle du dossier, poussez le levier qui se trouve en position active vers le bas. Réglez l'angle du dossier. Une fois que la position convient, remettez le levier d'activation en position inactive afin d'activer le vérin à gaz qui permettra de retenir l'angle.



Remarque!

N'oubliez jamais de bien maintenir le dossier lorsque vous activez le vérin à gaz.

Régler le support latéral

Pour régler la largeur et la hauteur du support latéral, desserrez le bouton de serrage (D). Réglez la hauteur et la largeur du support puis, lorsque la position convient, resserrez le bouton de serrage (D).

Régler le support lombaire

Desserrez la molette (E) et poussez le haut du support lombaire, qui est placé derrière la doublure du dossier, vers le bas, jusqu'à atteindre la profondeur souhaitée. Maintenez le support lombaire dans la position tout en resserrant la molette (E).

Remarque!



Vous devrez probablement modifier la hauteur du dossier pour pouvoir placer le support lombaire dans la bonne position.

Conseil!

Lorsque vous réglez le support lombaire, enlevez la housse du dossier afin d'y voir plus clair.

Barre de renforcement

Lors du renforcement du dossier

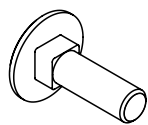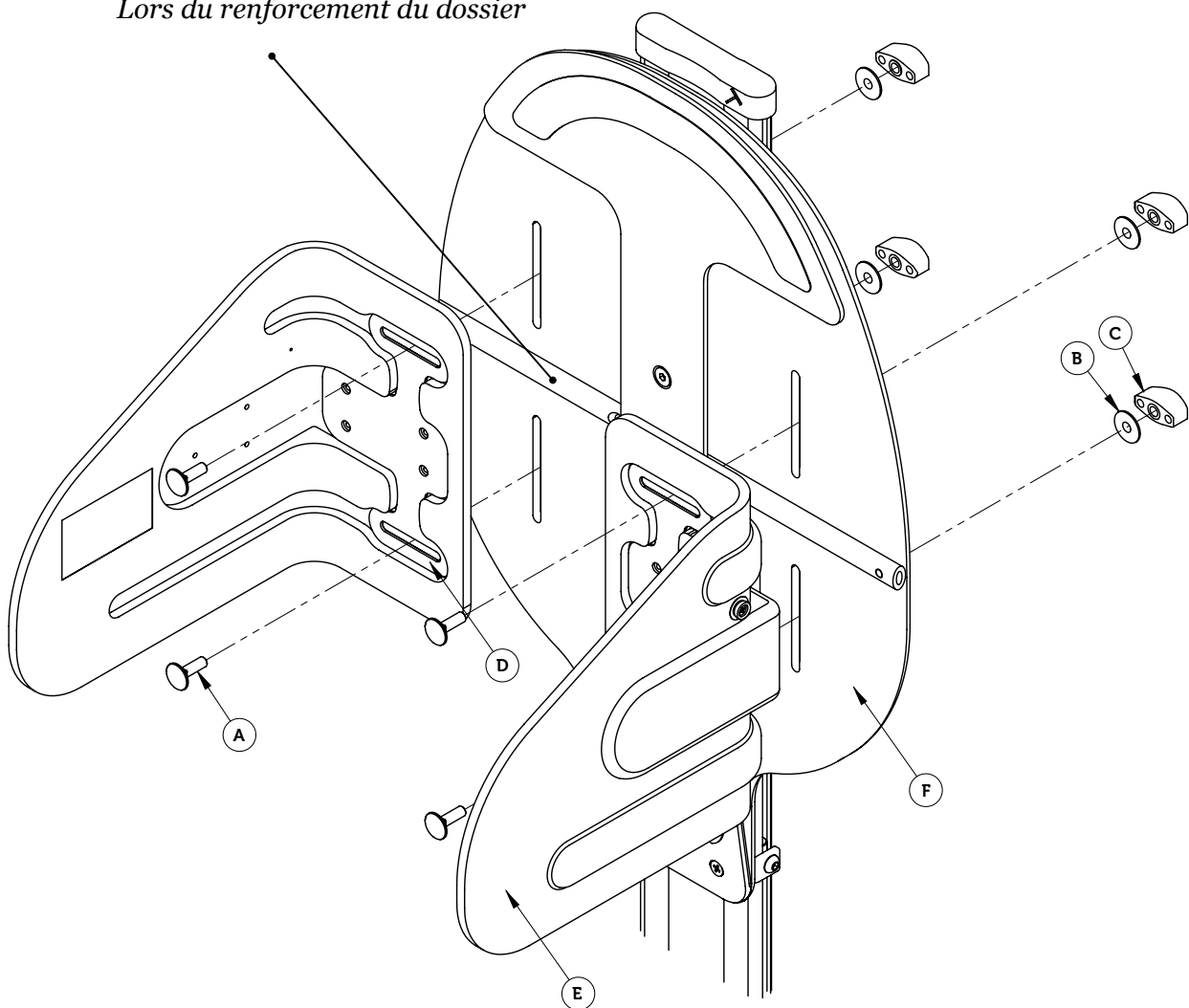

Vis à collet carré (A)
4 pcs



Rondelle (B)
4 pcs



Bouton de serrage (C)
4 pcs



Plaque perforée (D)
2 pcs

Support latéral

Montage du support latéral

Pour le montage des supports latéraux, vous aurez besoin de vis à collet carré (A), de rondelles (B), de boutons de serrage (C) et de plaques perforées (D). Les plaques perforées (D) empêchent les vis à collet carré (A) de tourner dans le vide.

Faites passer les vis à collet carré (A) à travers les plaques perforées (D), les supports latéraux (E) et les encoches du dossier (F). De l'autre côté du dossier (F), faites passer les vis dans les rondelles (B) et terminer la fixation avec les boutons de serrage (C).


Conseil!

Vous trouverez plus d'informations concernant le réglage du support latéral en pages 8 et 9 de ce manuel.

Support latéral en option

Si vous le souhaitez, au lieu de supports latéraux fixes, vous pouvez placer des supports latéraux pliables ou renforcés.


Le set de renforcement comprend des supports latéraux renforcés ainsi qu'une barre de renforcement. Pour monter le set de renforcement, veuillez consulter les instructions correspondantes.

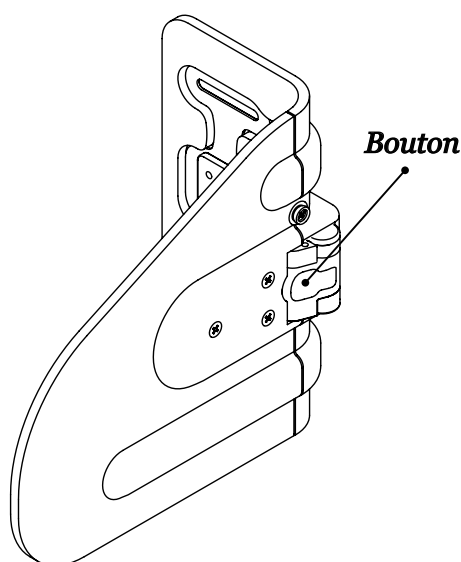

Support latéral pliable



Pour déployer le support latéral pliable, appuyez sur le bouton rouge.

Plaque de renforcement

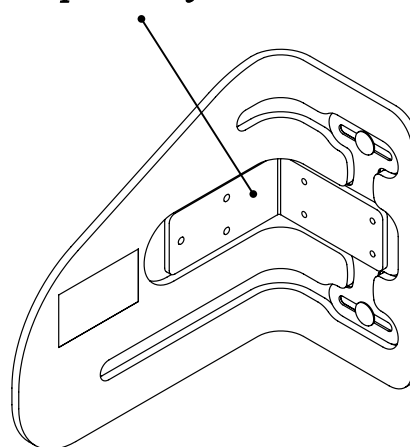

Support latéral renforcé

Le set de renforcement comprend des supports latéraux renforcés et une barre de renforcement.

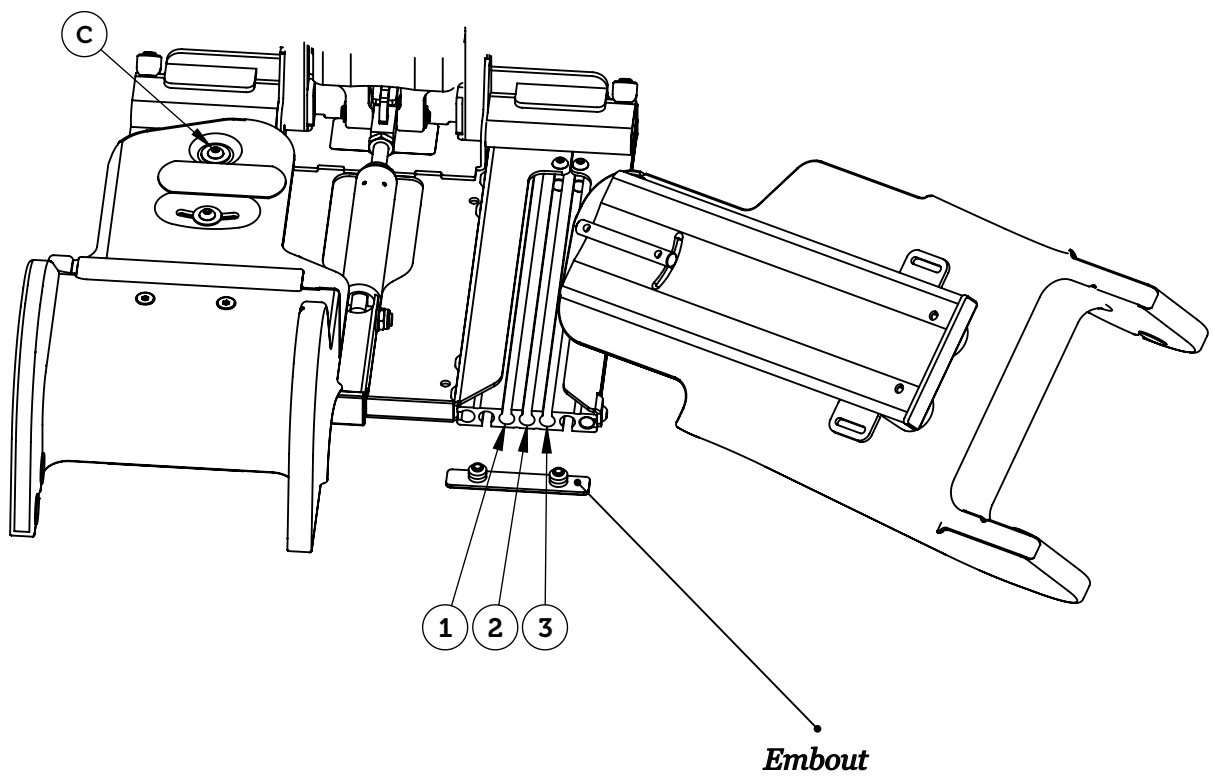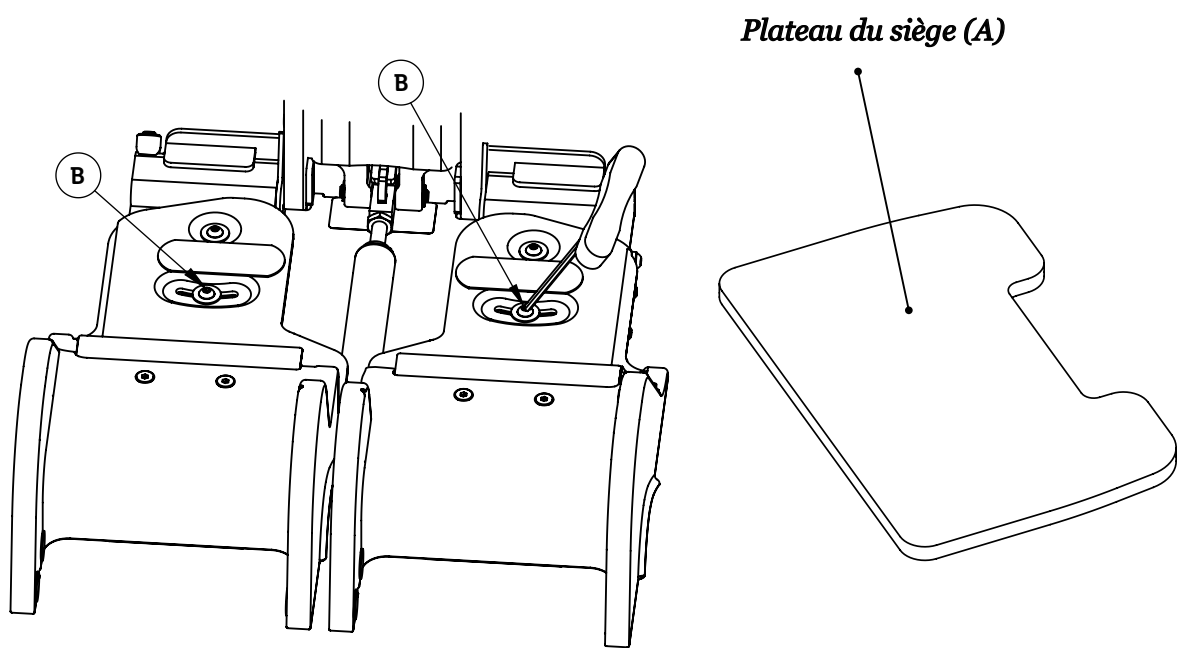

Le siège

Régler le siège

La profondeur du siège, la longueur des jambes et les éventuelles abduction/adduction des gouttières sont faciles à régler. Enlevez le revêtement du siège ainsi que le plateau (A) pour accéder aux vis (B).

Remarque!

Sachez que vous ne devez jamais enlever complètement les vis pour ajuster les gouttières, les dévisser légèrement suffit.

Régler la largeur du siège


Pour augmenter ou réduire la largeur du siège, il faut modifier la position des gouttières du profil inférieur. Commencez par enlever l'embout à l'avant du profil inférieur, puis, avec la clé Allen, desserrez les vis (B) de la gouttière. Une fois les vis légèrement desserrées (B), faites pivoter la gouttière vers l'extérieur et/ou placez-la dans le rail souhaité.

Pour une largeur maximale, insérez la gouttière dans le rail 3, et pour une largeur minimale, insérez-la dans le rail 1. Les gouttières se trouvent initialement dans le rail 1.

Resserrez les vis (B) une fois que vous avez obtenu la position souhaitée. Pour ce réglage, vous devez desserrer légèrement la vis arrière (C) de la gouttière.

Conseil!

Pour plus de précisions sur les unités de mesure du siège, voir page 59.

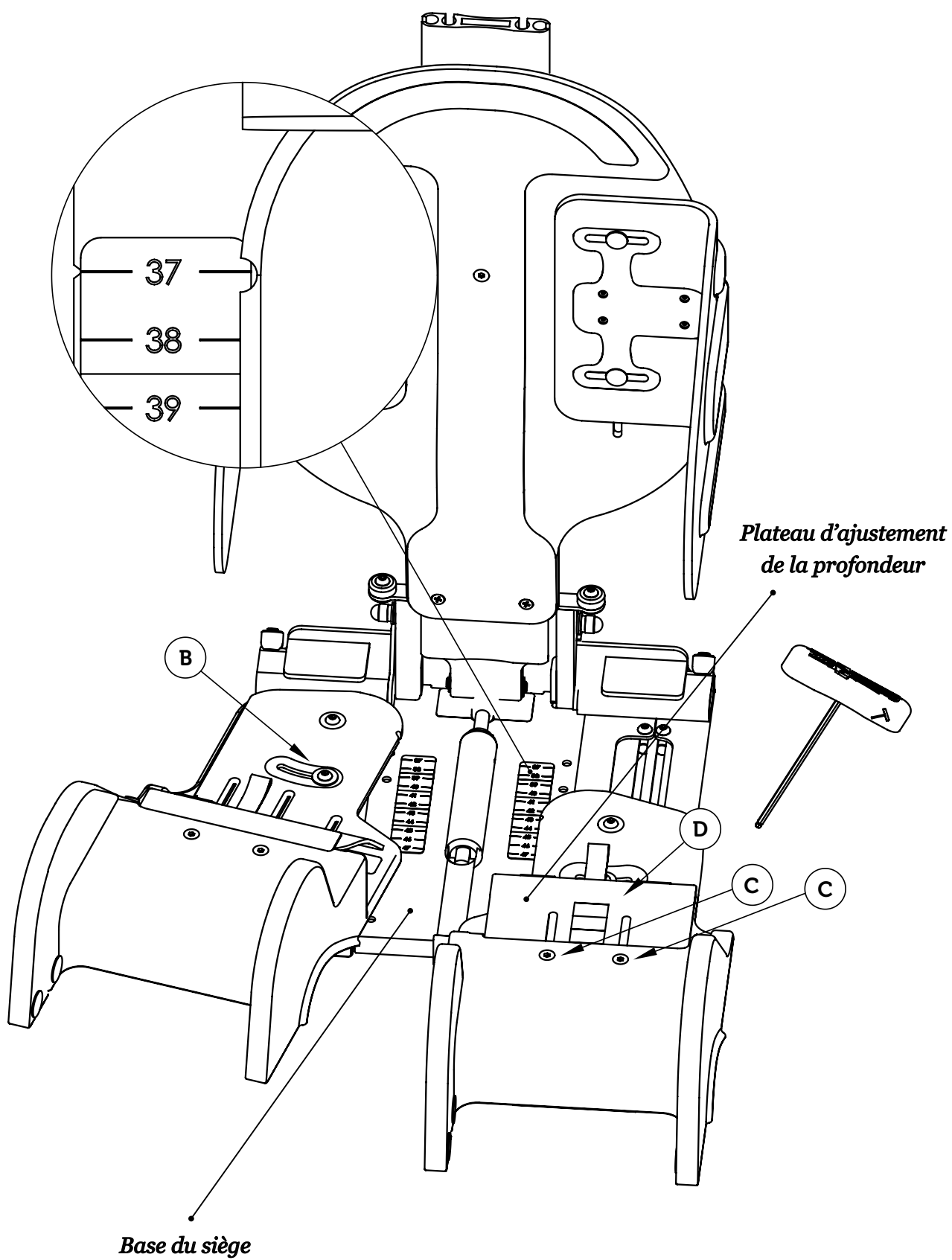

Le siège

Longueur des jambes

Pour modifier la longueur des jambes, desserrez la vis (B) avec la clé Allen. Faites glisser la gouttière, puis resserrez la vis (B) une fois que la longueur convient.

Régler le plateau d'ajustement de la profondeur

Lors du réglage de la profondeur du siège, les plateaux d'ajustement de la profondeur doivent également être réglés. Desserrez les vis avant (C) des gouttières avec la clé Allen et faites glisser les plateaux jusqu'à obtenir la position souhaitée. Resserrez les vis (C).

Conseil!

Pour régler la profondeur du siège, aidez-vous des échelles de couleurs qui se trouvent sur la base du siège ainsi que sur les plateaux d'ajustement de la profondeur.

Par exemple, si la profondeur du siège est réglée sur 43 cm (couleur grise), tirez sur les plateaux d'ajustement jusqu'à ce qu'ils se trouvent également sur le gris. De cette façon, les plateaux d'ajustement correspondent bien avec la profondeur du siège et l'assise est aussi idéale que possible.

Bien sûr, tenez toujours compte des besoins et du confort de l'utilisateur.

Abduction et adduction

Pour régler les gouttières dans l'une de ces positions, desserrez les vis (B) avec la clé Allen. Placez les gouttières dans la position souhaitée, puis resserrez les vis (B).

Remarque!

Sachez que vous ne devez jamais enlever complètement les vis pour les réglages, les desserrer légèrement suffit.

Coussin chauffant

Coussin chauffant

Les éléments chauffants maintiennent la température du corps à niveau et permettent d'éviter, par temps froid, que le corps ne se refroidisse. Une fois que la température du corps est atteinte, les éléments chauffants se désactivent dans un but d'économie d'énergie. Si la température du corps descend, les éléments s'activent à nouveau jusqu'à ce que la température soit de nouveau à niveau.

Les connecteurs sont choisis minutieusement afin de réduire le risque qu'ils ne soient pas connectés correctement. Les connecteurs, la batterie ou le chargeur ne doivent jamais entrer en contact avec de l'eau ou être exposés à l'humidité.

Montage des éléments chauffants

Pour monter les éléments chauffants sous la housse du siège et celle du dossier, utilisez des bandes Velcro.

Les éléments chauffants

Les éléments chauffants disposent de capteurs sensibles à des températures situées entre +27° et +32°.

L'isolation supporte aussi bien de hautes comme de basses températures et ne doit être exposée à la lumière du soleil, à l'humidité ou à des produits chimiques. Le matériau est ignifuge (FMVSS 302) et imperméable, afin d'éviter que de la condensation ne se forme.

Batterie

La batterie est rechargeable (Ni-MH) et ne peut être rechargée qu'avec le chargeur fourni. Lorsque la batterie ne fonctionne plus, déposez-la dans un centre de recyclage.



Remarque!

Déposez la batterie dans un centre de recyclage lorsqu'elle ne fonctionne plus du tout.



Charger la batterie

Suivez les étapes suivantes pour savoir comment charger la batterie correctement. Pour plus d'informations sur le kit chauffant, veuillez consulter le manuel correspondant.

- 1) Connectez le chargeur à une prise murale (230V, 50Hz).
- 2) Connectez le chargeur au boîtier de contrôle.
- 3) Quand vous connectez la batterie déchargée, la lumière jaune du chargeur clignote lentement. Cela indique un chargement lent. Après un moment, la lumière du chargeur passe au vert et clignote plus vite : cela signifie que le chargement s'effectue plus rapidement.
- 4) Laissez la batterie connectée au chargeur jusqu'à ce que la lumière verte de l'indicateur soit allumée de façon ininterrompue. Cela indique que la batterie est pleine et qu'elle est passée en mode de charge d'entretien.
- 5) Débranchez le câble de la prise murale.
- 6) Déconnectez le chargeur du boîtier de contrôle.

Remarque!

Si la lumière du chargeur LED est jaune et clignote rapidement, cela signifie que la batterie ne fonctionne plus.

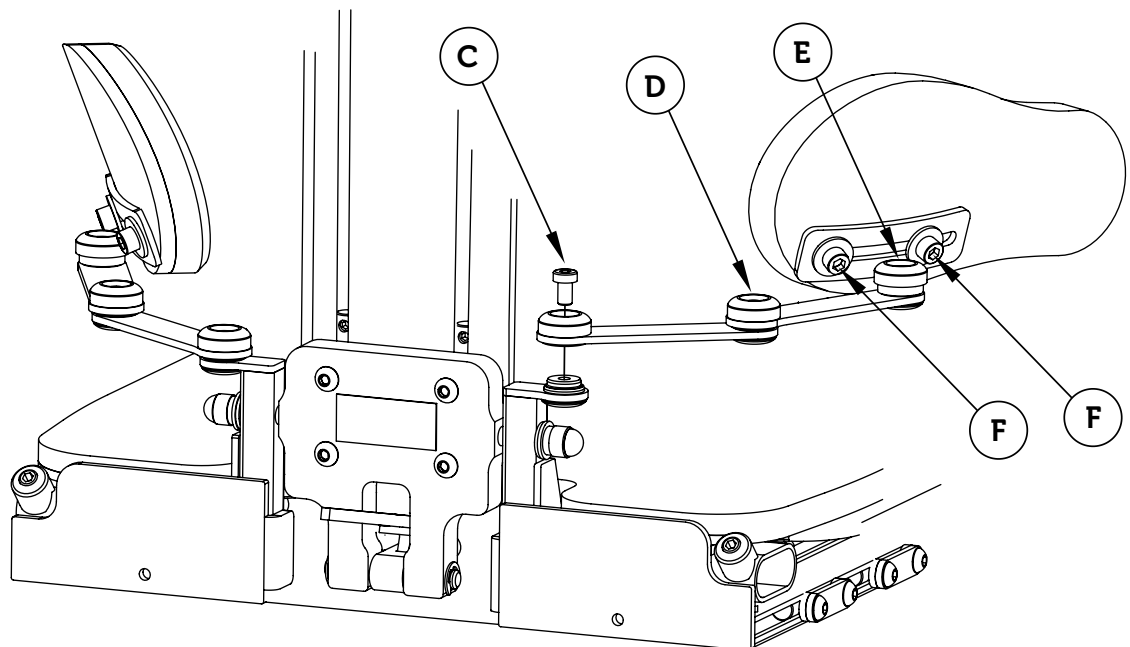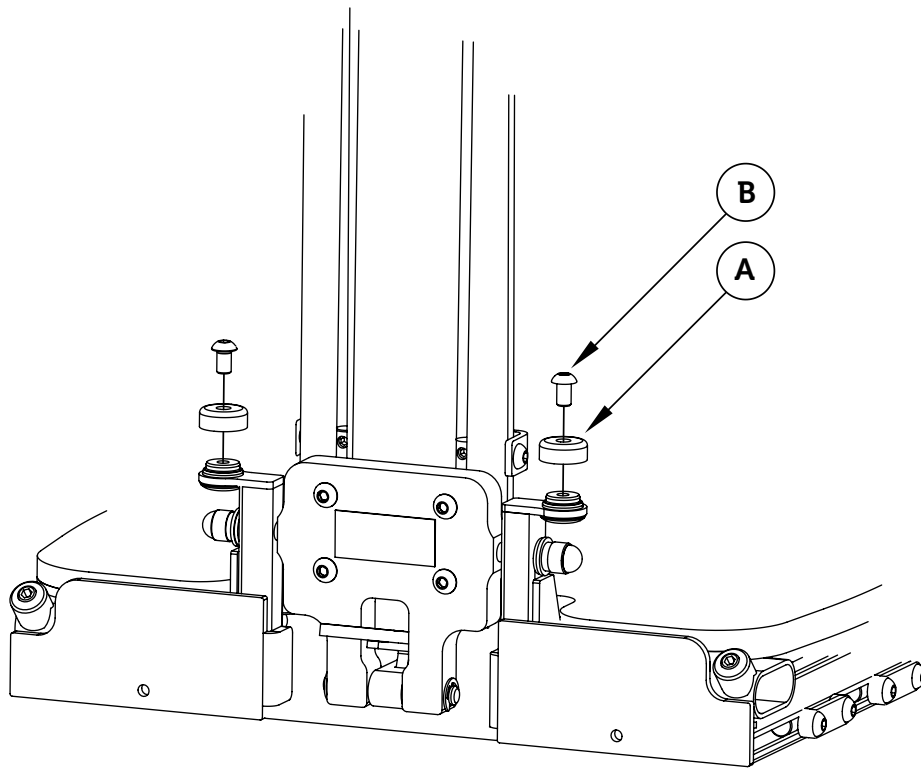

Support de hanches

Montage du support de hanches


Avant de pouvoir fixer le support de hanches, vous devez enlever le capuchon (A). Enlevez la vis (B) puis enlever le capuchon. La vis (B) est remplacée par un autre type de vis (C).

Montez le support de hanches à la place du capuchon (A), et fixez-le avec la vis (C).


Réglage du support de hanches

Pour régler l'angle du support de hanches, desserrez la vis (C), (D), ou (E), en fonction de ce que vous souhaitez faire. Pour régler la hauteur du plateau du support de hanches, desserrez les vis (F) et placez le plateau dans la position souhaitée.


Resserrez les vis (F).

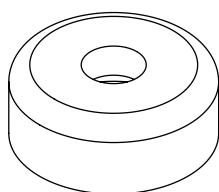


Capuchon (A)
Enlevé

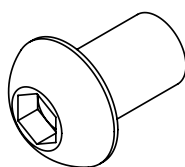

Vis M6 (B)
Remplacée par (C)

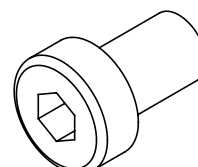

Vis (C)
Nouvelle vis

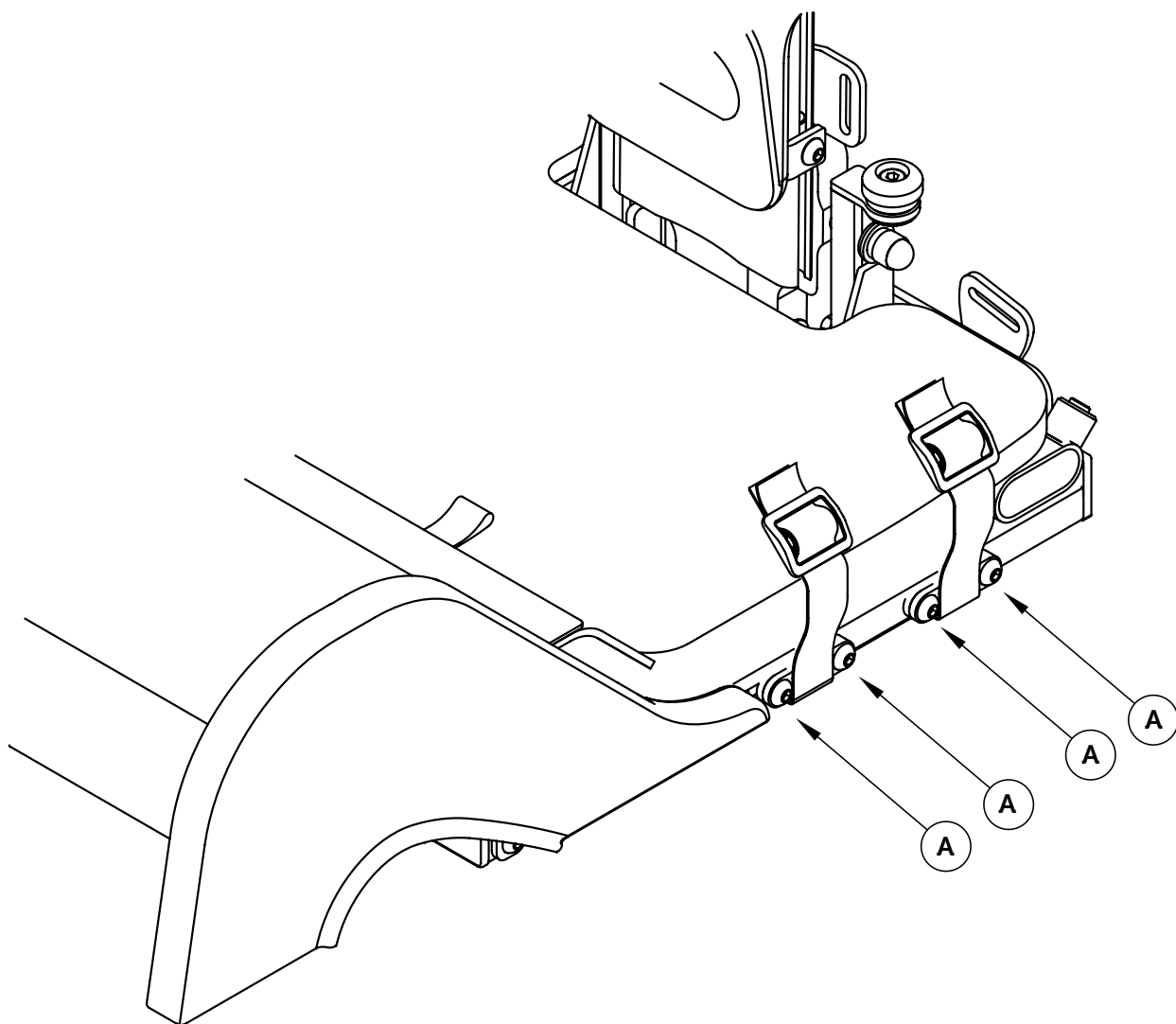

Ceinture de hanches


Régler le support de la ceinture de hanches


Pour modifier la position du support de la ceinture de hanches, desserrez légèrement les vis (A) et placez le support dans la position souhaitée. Resserrez les vis (A).

Montage de la ceinture de hanches

Lorsque vous montez la ceinture dans le support, utilisez un passant. Voyez sur l'image comment placer le passant.

Méthode avec le passant

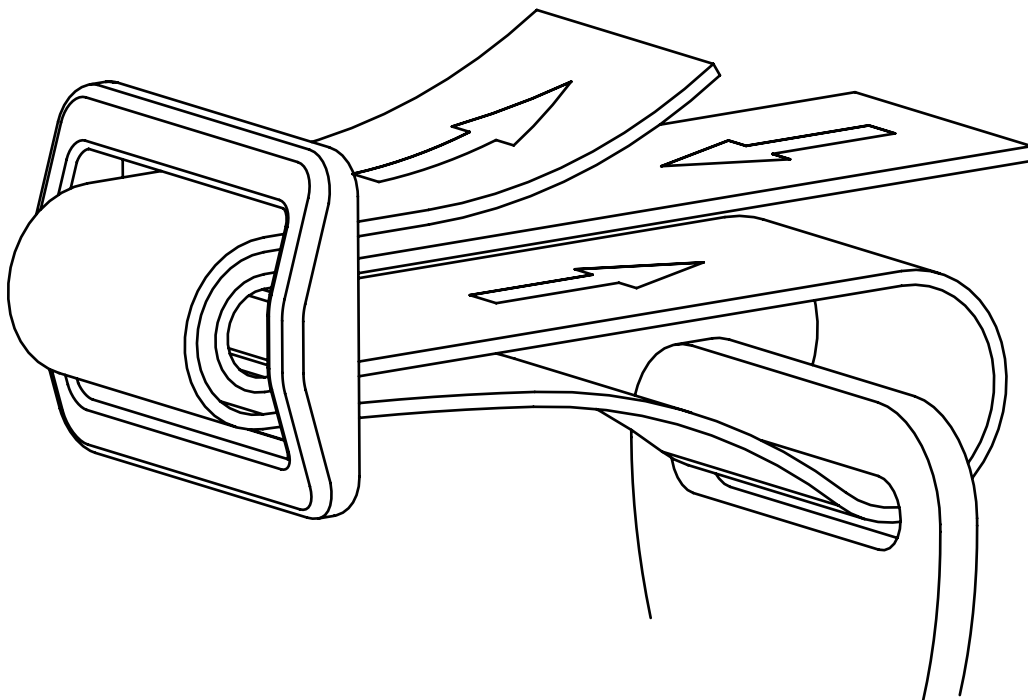

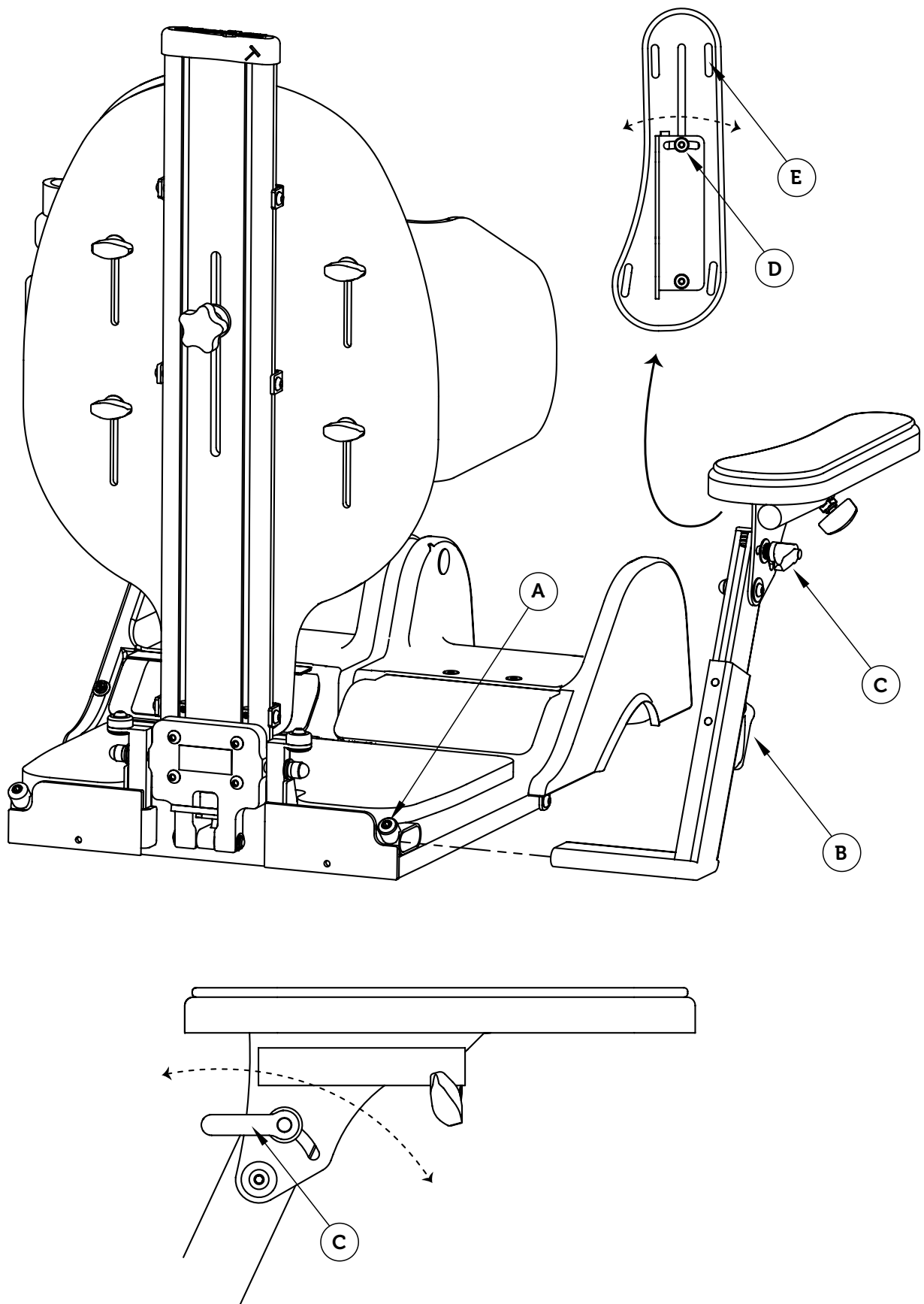

Accoudoirs à partir du siège

Montage des accoudoirs

Faites glisser l'accoudoir dans les tubes prévus à cet effet à la base du siège. Resserrez la vis (A) une fois que la position de l'accoudoir convient.

Régler la largeur de l'accoudoir

Pour modifier la largeur de l'accoudoir desserrez la vis (A) et placez l'accoudoir dans la position souhaitée. Resserrez la vis (A).

Régler la hauteur de l'accoudoir

Pour modifier la hauteur de l'accoudoir, desserrez le levier (B) et placez l'accoudoir à la hauteur souhaitée. Resserrez le levier (B).

Régler l'angle de l'accoudoir


Pour régler l'angle de l'accoudoir, desserrez le levier (C) et faites pivoter l'accoudoir jusqu'à obtenir l'angle souhaité. Resserrez le levier (C).

Régler l'angle latéral

Pour régler l'angle latéral de l'accoudoir, desserrez la vis (D) et faites pivoter l'accoudoir jusqu'à obtenir la position souhaitée. Resserrez la vis (D).

Coussin

Pour fixer le coussin sur le plateau de l'accoudoir, faites passer les bandes Velcro dans les quatre ouvertures (E) et attachez-les ensemble sous le plateau.

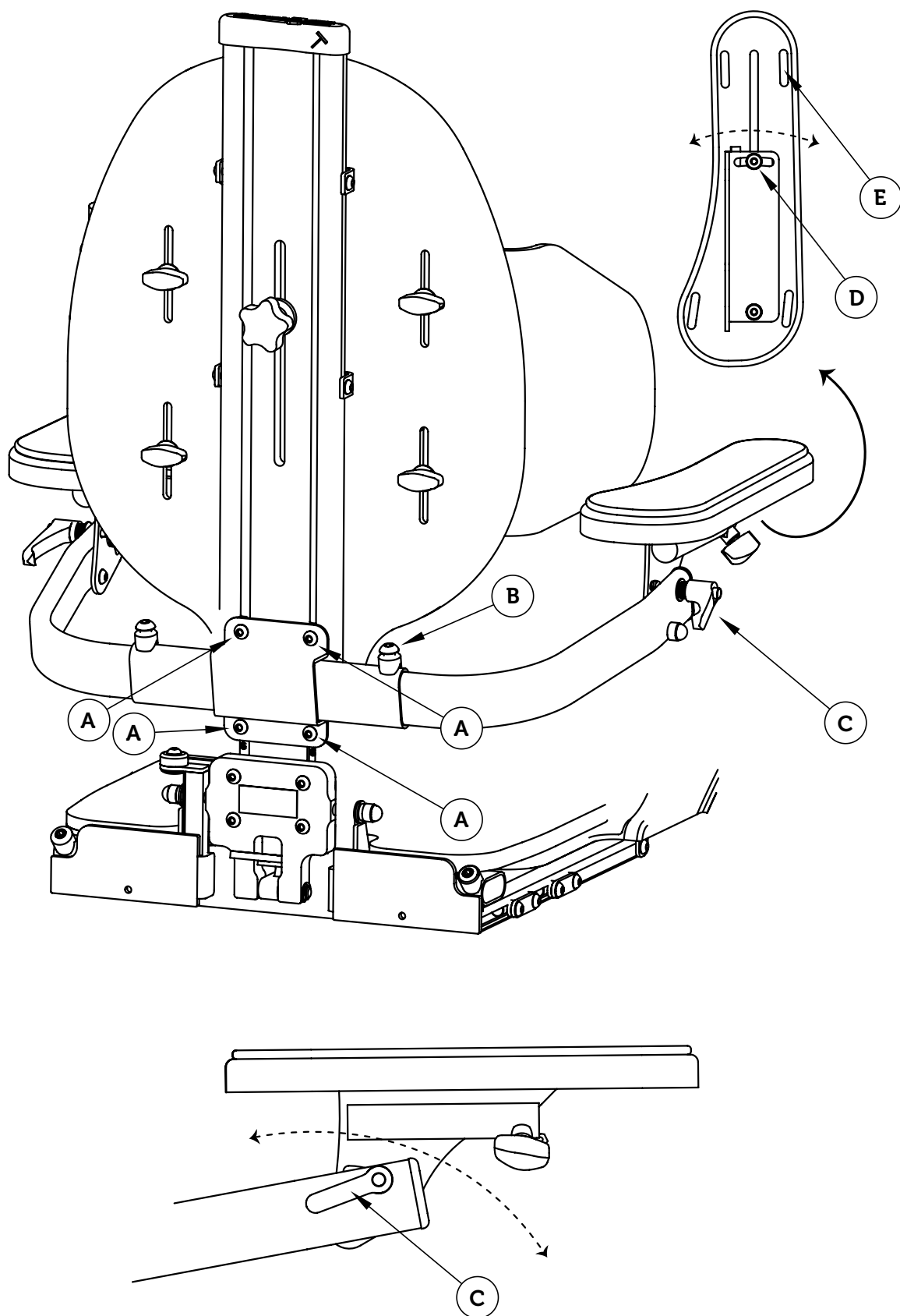

Accoudoirs à partir du dossier, fixes

Montage des accoudoirs fixes

Avant de monter les accoudoirs à partir du dossier, vous devez enlever la clé Allen et, si nécessaire, les éléments montés préalablement. Ces éléments peuvent être : le repose-tête, les supports de montage supérieurs et le guidon de poussée.

Faites glisser le support des accoudoirs dans les rails à l'arrière du dossier. Fixez le support avec les vis (A) une fois que ce dernier se trouve dans la position souhaitée. Remplacez les éléments que vous aviez démontés avant le montage du support.

Régler la largeur

Pour modifier la largeur de l'accoudoir, desserrez la vis (A) et placez l'accoudoir dans la position souhaitée. Resserrez la vis (A).

Régler la hauteur de l'accoudoir

Pour modifier la hauteur de l'accoudoir, desserrez le levier (B) et placez l'accoudoir à la hauteur souhaitée. Resserrez le levier (B).

Régler l'angle de l'accoudoir


Pour régler l'angle de l'accoudoir, desserrez le levier (C) et faites pivoter l'accoudoir jusqu'à obtenir l'angle souhaité. Resserrez le levier (C).

Régler l'angle latéral

Pour régler l'angle latéral de l'accoudoir, desserrez la vis (D) et faites pivoter l'accoudoir jusqu'à obtenir l'angle souhaité. Resserrez la vis (D).

Coussin

Pour fixer le coussin sur le plateau de l'accoudoir, faites passer les bandes Velcro dans les quatre ouvertures (E) et attachez-les ensemble sous le plateau.

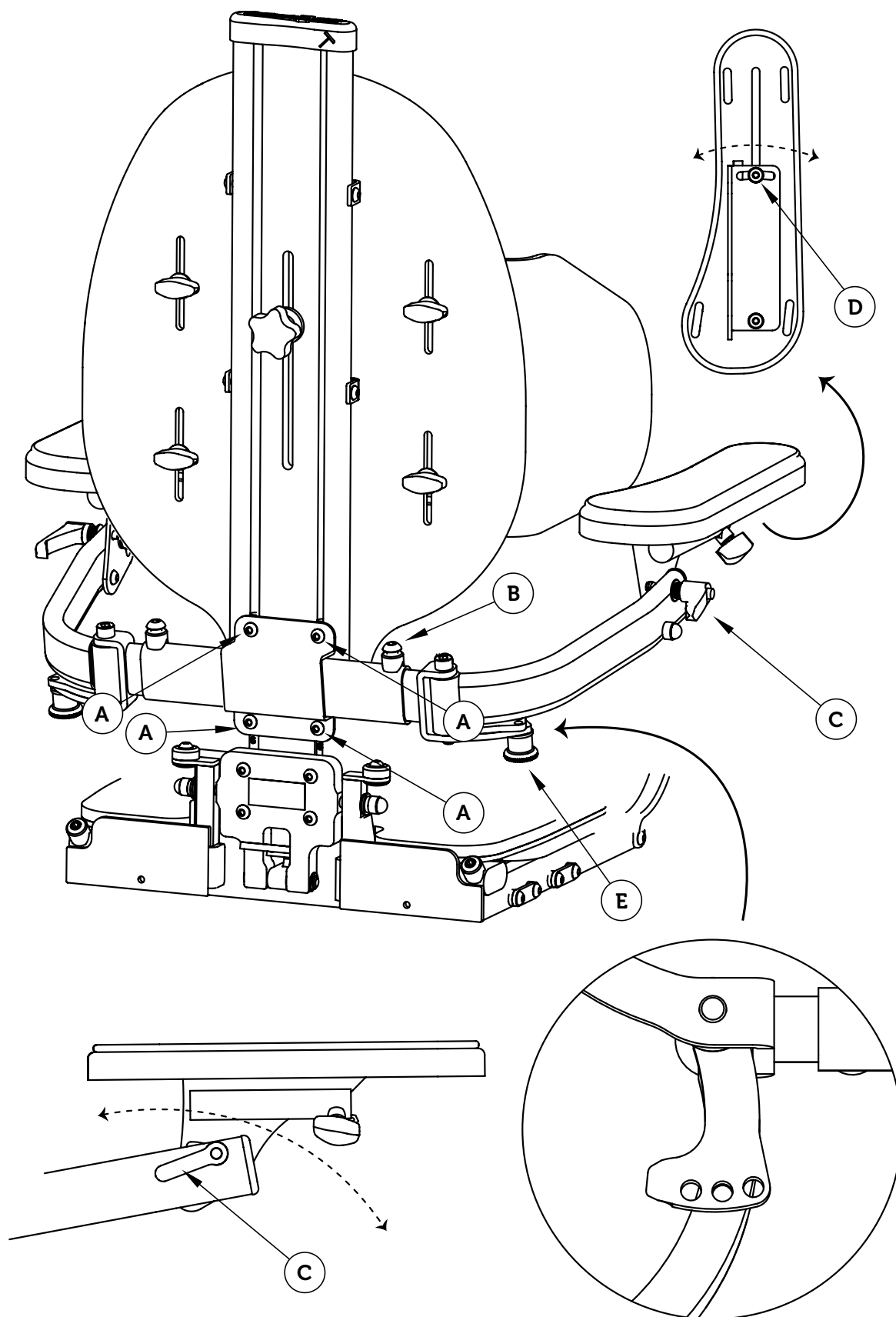

Trois trous de fixation
Qui déterminent l'angle de l'accoudoir.

Accoudoirs à partir du dossier, repliables

Montage des accoudoirs repliables

Avant de monter les accoudoirs à partir du dossier, vous devez enlever la clé Allen et, si nécessaire, les éléments montés préalablement. Ces éléments peuvent être : le repose-tête, les supports de montage supérieurs et le guidon de poussée.

Faites glisser le support des accoudoirs dans les rails à l'arrière du dossier. Fixez le support avec les vis (A) une fois que ce dernier se trouve dans la position souhaitée. Remplacez les éléments que vous aviez démontés avant le montage du support.

Régler la largeur de l'accoudoir

Pour modifier la largeur de l'accoudoir, desserrez la vis (A) et placez l'accoudoir dans la position souhaitée. Resserrez la vis (A).

Régler la hauteur de l'accoudoir

Pour modifier la hauteur de l'accoudoir, desserrez le levier (B) et placez l'accoudoir à la hauteur souhaitée. Resserrez le levier (B).

Régler l'angle de l'accoudoir


Pour régler l'angle de l'accoudoir, desserrez le levier (C) et faites pivoter l'accoudoir jusqu'à obtenir l'angle souhaité. Resserrez le levier (C). Voir pages 24–25.

Régler l'angle latéral

Pour régler l'angle latéral de l'accoudoir, desserrez la vis (D) et faites pivoter l'accoudoir jusqu'à obtenir la position souhaitée. Resserrez la vis (D).

Pliage de l'accoudoir

Pour replier l'accoudoir, tirez le bouton de verrouillage (E) vers le bas et pliez l'accoudoir. Quand vous ramenez l'accoudoir, vous devez entendre un « clic ». L'angle de l'accoudoir peut être réglé de trois façons différentes, selon le trou dans lequel vous placez le bouton de fixation.

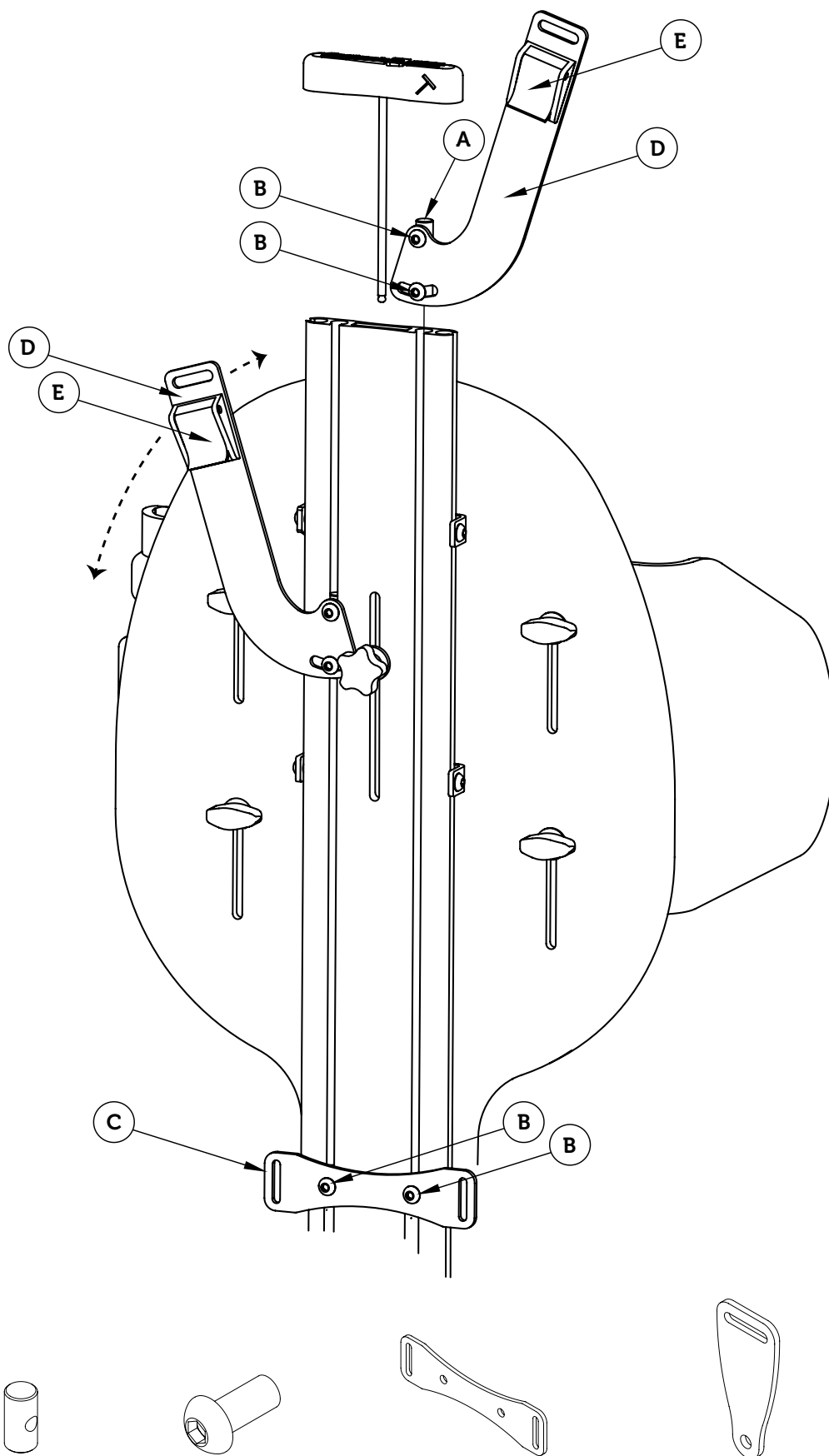

Cylindre (A)
4 pcs

Vis M6 (B)
6 pcs

Support inférieur (C)
Compris par défaut

Support inférieur (F)
En option 2 pcs

Harnais de sécurité

Placer le support de montage inférieur

Avant de placer le support de montage inférieur (C), vous devez enlever la clé Allen et, si nécessaire, les éléments montés préalablement. Ces éléments peuvent être : le repose-tête, les supports de montage supérieurs et le guidon de poussée.

Faites glisser le support de montage inférieur dans les rails à l'arrière du dossier. Fixez le support avec les vis (B) une fois que ce dernier se trouve dans la position souhaitée. Remplacez les éléments que vous aviez démontés avant le montage du support.

Régler le support de montage inférieur

Pour modifier la hauteur, desserrez légèrement les vis (B) et placez le support à la hauteur souhaitée. Resserrez les vis (B).

Placer le support de montage supérieur


Enlevez la clé Allen et faites glisser le cylindre (A) du support de montage supérieur (D) dans les rails au dos du fauteuil. Une fois que le support se trouve à la hauteur souhaitée, Fixez-le avec les vis (B). Remplacez la clé Allen.


Régler le support de montage supérieur

Pour régler la hauteur et l'angle du support, desserrez légèrement les vis (B) et placez le support dans la position souhaitée. Resserrez les vis (B).

Autre support de montage inférieur

Pour fixer le harnais plus bas, vous pouvez employer un autre support de montage (F). Il peut être monté avec la vis fournie et dans un des trous situés à la base du siège.

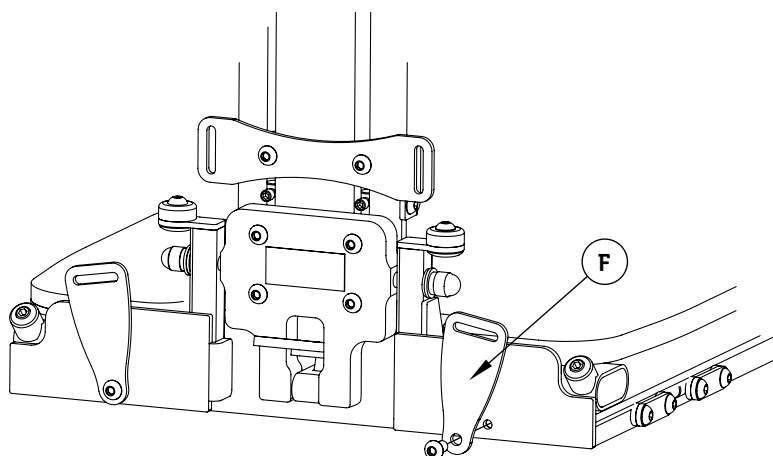

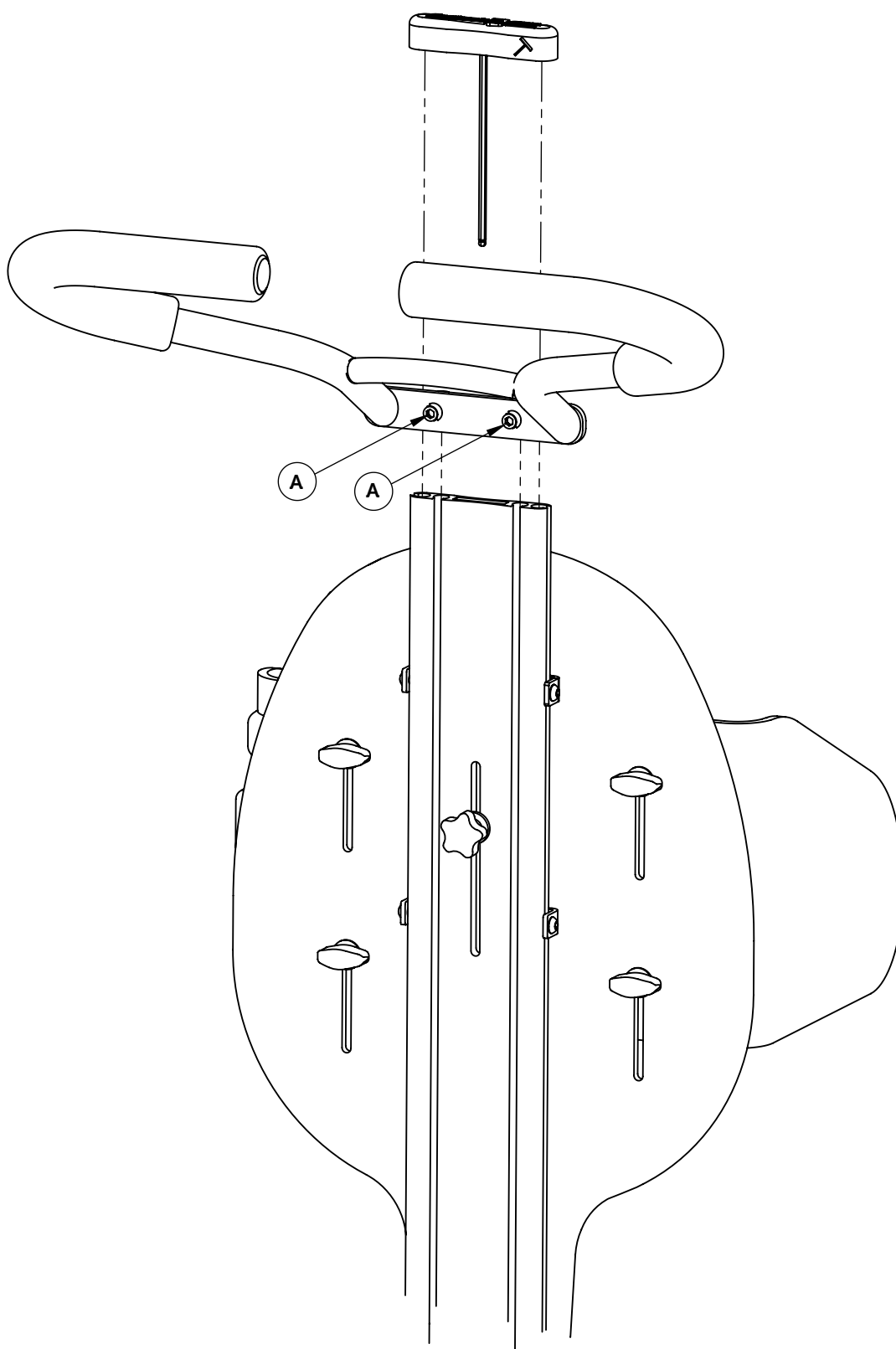

Guidon de poussée

Montage du guidon de poussée

Avant de monter le guidon de poussée, vous devez enlever la clé Allen et, si nécessaire, les éléments montés préalablement. Ces éléments peuvent être : le repose-tête et les supports de montage supérieurs.


Faites glisser les cylindres du guidon de poussée dans les rails à l'arrière du dossier. Fixez le guidon avec les vis (A) une fois que ce dernier se trouve dans la position souhaitée. Remplacez les éléments que vous aviez démontés avant le montage du support.

Régler la hauteur

Pour modifier la hauteur du guidon, desserrez les vis (A) et placez le guidon à la hauteur souhaitée. Resserrez les vis (A).

Remarque!

Sachez que vous ne devez jamais enlever complètement les vis pour régler la hauteur du guidon de poussée, les desserrer légèrement suffit.

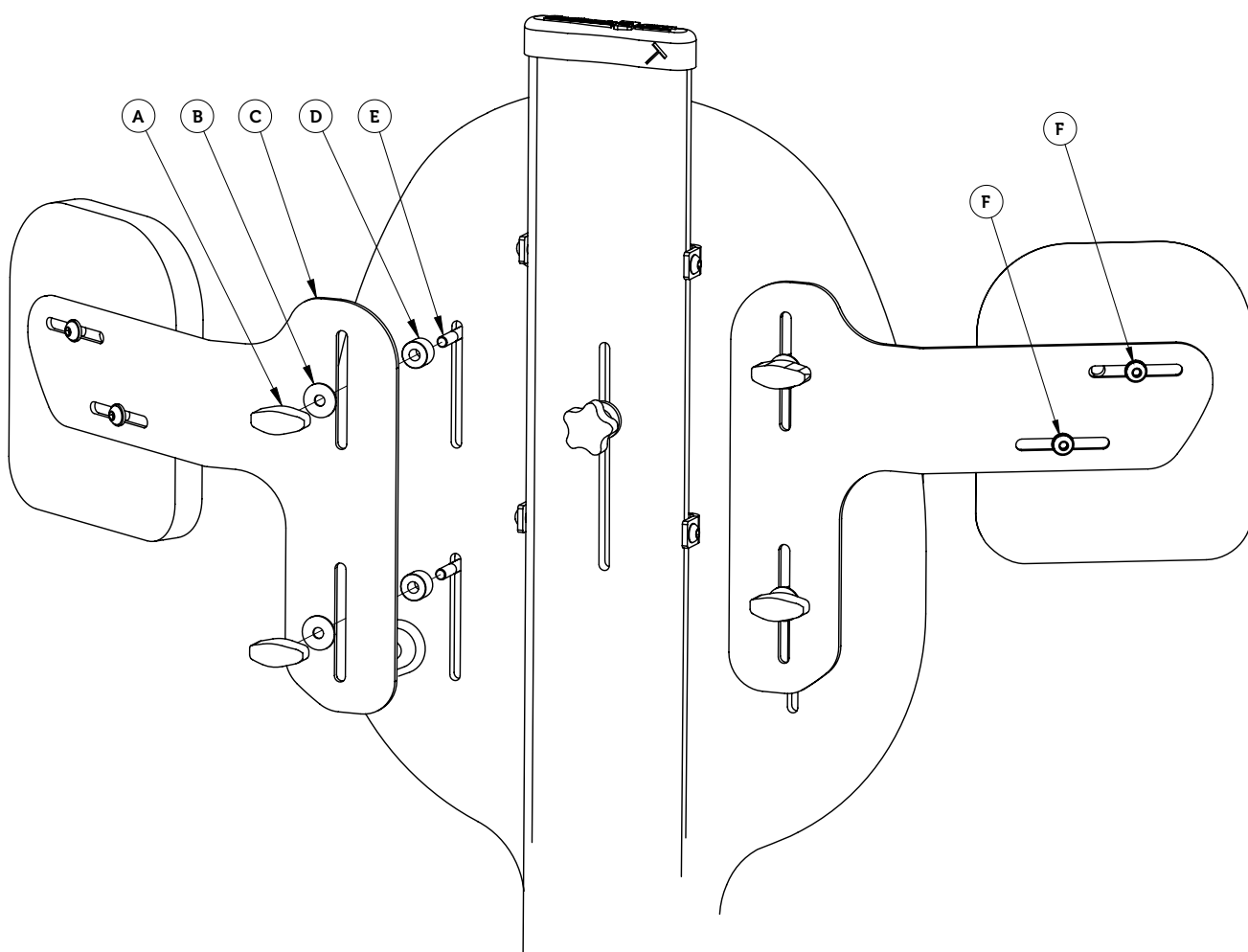


Bouton de serrage (A)
4 pcs



Rondelle (B)
4 pcs



Rondelle épaisse (D)
4 pcs

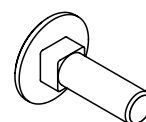

**Vis (tête ronde) à
collet carré (E)**
4 pcs

Support de bras

Montage du support de bras

Pour monter le support de bras, utilisez les boutons de serrage (A), les rondelles (B), les rondelles épaisses (D) et les vis à collet carré (E). Les vis à collet carré dans le support latéral doivent être remplacées par les plus longues vis à collet carré (fournies). Vous trouverez plus d'informations sur le montage du support latéral à la page 6 de ce manuel.

Faites passer les vis à collet carré (E) à travers le support latéral et dans la fente du dossier. De l'autre côté du dossier, fixez-les avec les rondelles épaisses (D), les supports de bras (C), les rondelles (B) et les boutons de serrage.

Remarque!

Lors du montage des supports de bras, vous devez remplacer les vis à collet carré du support latéral par les vis à collet carré livrées avec le dispositif, celles-ci étant plus longues.

Régler la hauteur

Pour modifier la hauteur du support de bras, desserrez les boutons de serrage (A). Réglez la hauteur, puis resserrez les boutons de serrage (A) une fois que le support se trouve à la hauteur souhaitée.

Régler la largeur


Pour régler la largeur du support de bras, desserrez les vis (F). Réglez la largeur puis resserrez les vis quand la largeur convient.

Remarque!

Lors de l'ajustement du support de bras, le support latéral est alors disponible et peut également être ajusté.

Housse du coussin

Quand la housse du coussin doit être nettoyée, vous pouvez facilement l'enlever du support de bras grâce à l'élastique.

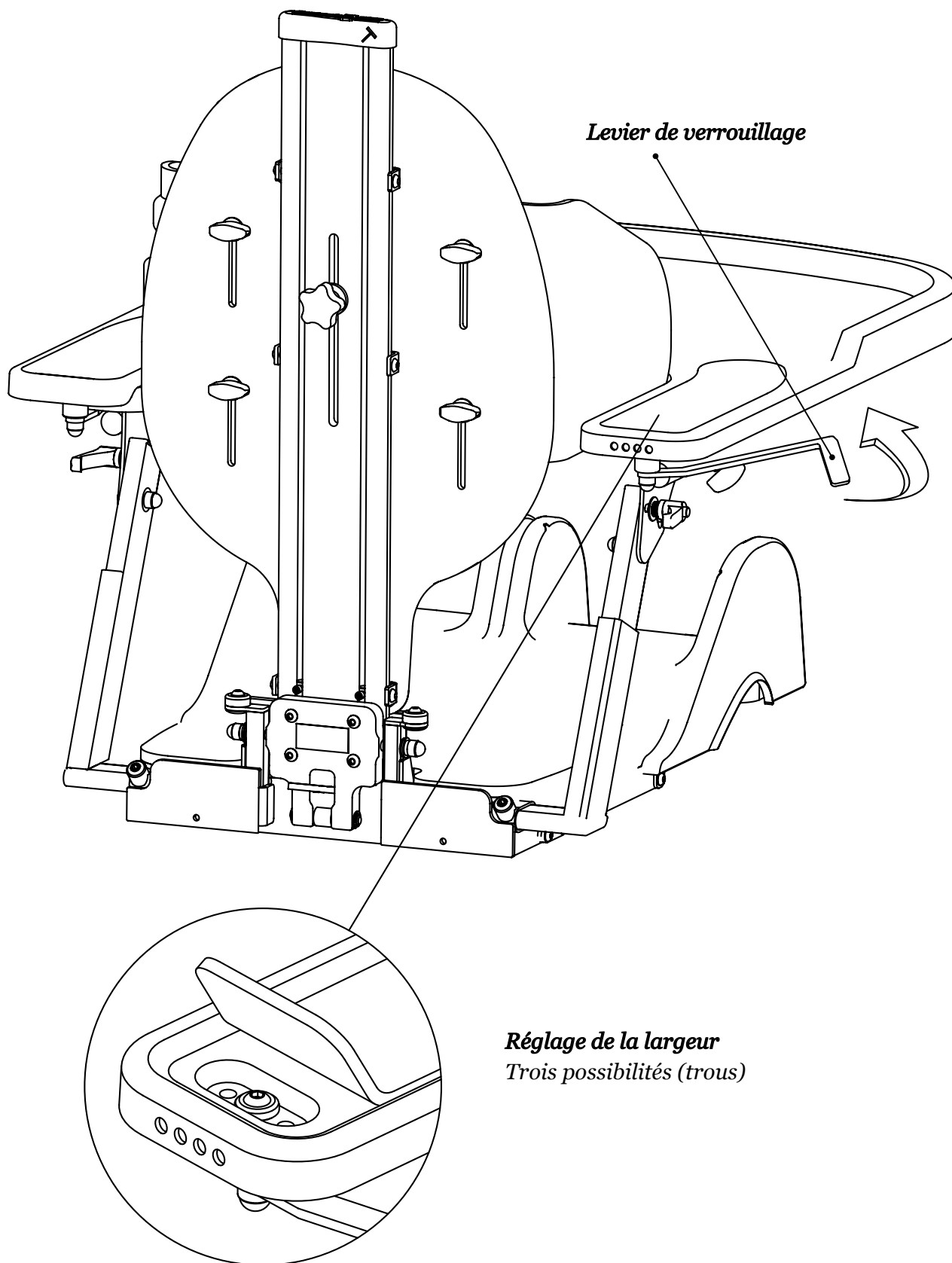

Tablette, fixe

Montage de la tablette

Placez la tablette sur les accoudoirs et faites pivoter le levier de verrouillage de la table vers le dessous de l'accoudoir. Vous devez faire pivoter le levier jusqu'à ce qu'il se trouve sous le bord de l'accoudoir.

Changer de trou de montage



Vous avez le choix entre trois trous de montage pour la largeur. Pour modifier la largeur, utilisez un des trous de montage situés sous le coussinet. Le levier de verrouillage est monté dans le trou central par défaut.

Pour changer de trou, vous devez d'abord relever l'extrémité du coussinet. Le marquage au bord à l'arrière indique la taille de la tablette.




Remarque!


Ne levez pas l'avant de la tablette.

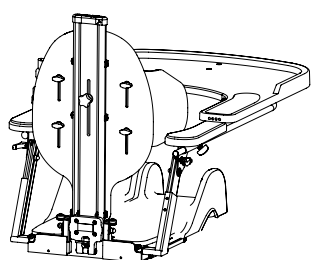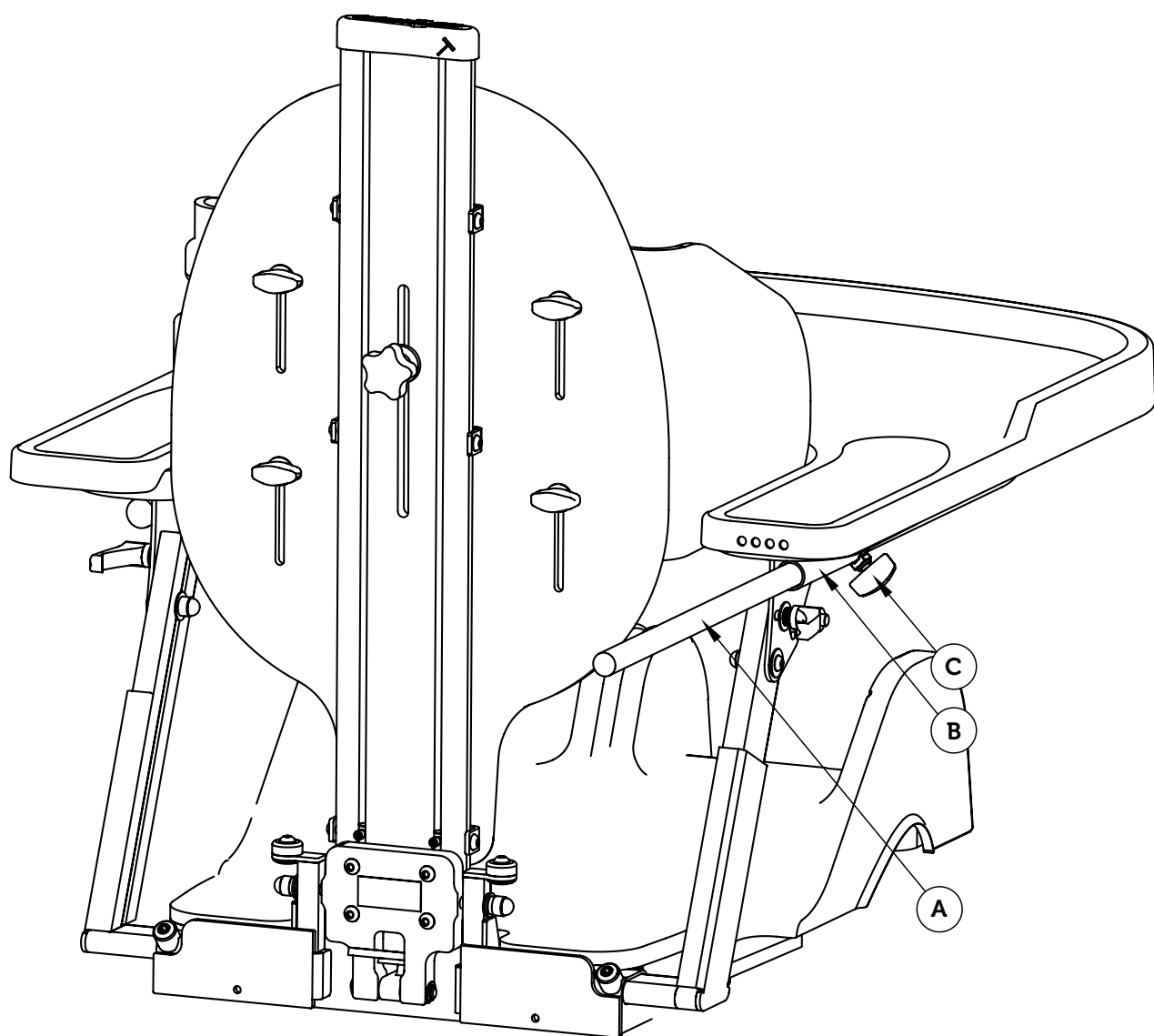

Position 1

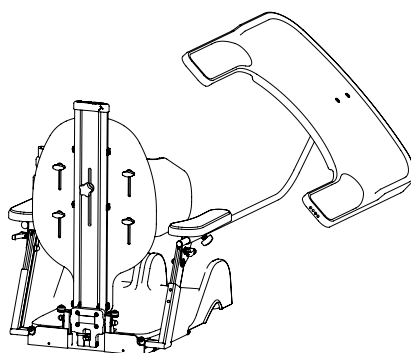

Position 2

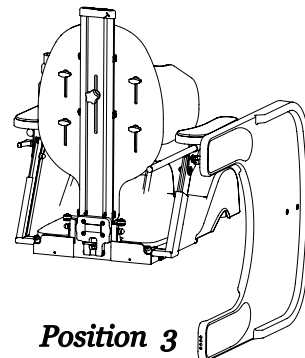

Position 3

Tablette, pliable

Montage de la tablette

Pour monter la tablette pliable, faites glisser le tube de la tablette (A) dans le cylindre (B) situé sous l'accoudoir. Poussez la tablette jusqu'à obtenir la position souhaitée et laissez-la reposer sur les accoudoirs. Resserrez le bouton de serrage (C) pour fixer la tablette.

Déplier et rabattre la tablette

Pour déplier la tablette, desserrez d'abord légèrement le bouton de serrage (C). Levez la tablette et tirez-la vers l'avant. Continuez à lever la tablette et amenez-la sur le côté. Lorsque la tablette est à son niveau le plus bas, repoussez-la et resserrez le bouton de serrage (C).

- 1) Tirez la tablette vers l'avant
- 2) Continuez à lever la tablette et amenez-la sur le côté
- 3) Lorsque la tablette est tout en bas, repoussez-la


Remarque!

N'oubliez pas de resserrer le bouton de serrage (C) après avoir déplié ou rabattu la tablette. Si vous utilisez des leviers de verrouillage, vous devez les amener au bord de l'accoudoir. Voir pages 34-35.

Rappel!

Tirez la tablette aussi loin que possible vers l'avant afin de ne pas blesser l'utilisateur.

Tablette renforcée
Vue du dessous

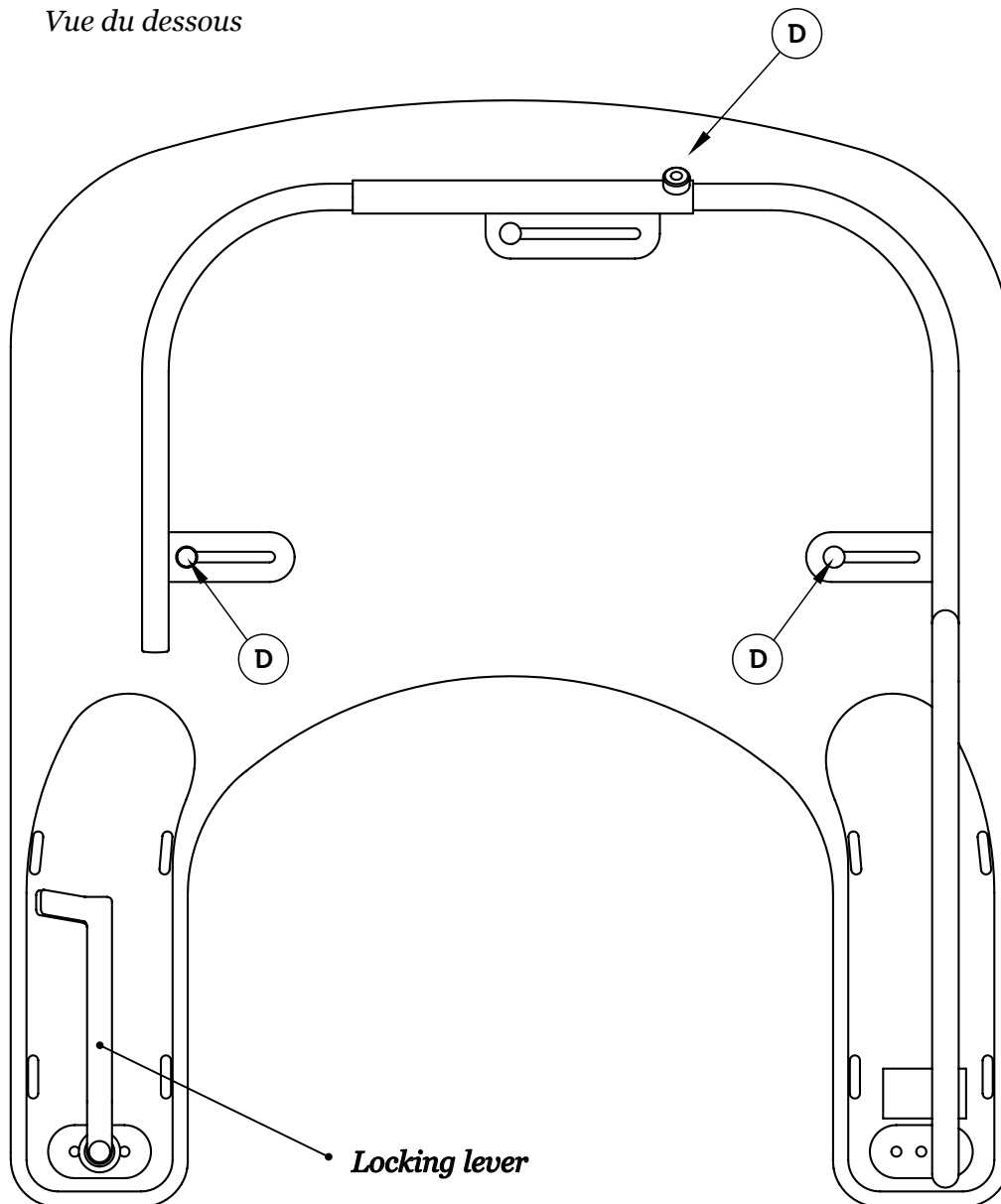

Tablette, supports de montage renforcés

Montage de la tablette renforcée

Pour monter la tablette renforcée, faites glisser le cylindre de la tablette (A) dans le tube (B) situé sous l'accoudoir. Ensuite, poussez la tablette jusqu'à obtenir la position souhaitée et laissez-la reposer sur les accoudoirs.


Vissez le bouton de serrage (C) pour fixer la tablette.



Régler la hauteur

Au lieu d'ajuster la largeur des accoudoirs, vous pouvez régler la largeur de la tablette de sorte que les supports de montage correspondent avec les tubes de montage dans les supports de l'accoudoir. Desserrez les vis (D) et ajustez la largeur. Resserrez les vis (D).


Remarque!

Si le réglage de la largeur de la tablette ne suffit pas, vous pouvez encore modifier la largeur des accoudoirs. Voir pages 22-23 de ce manuel.

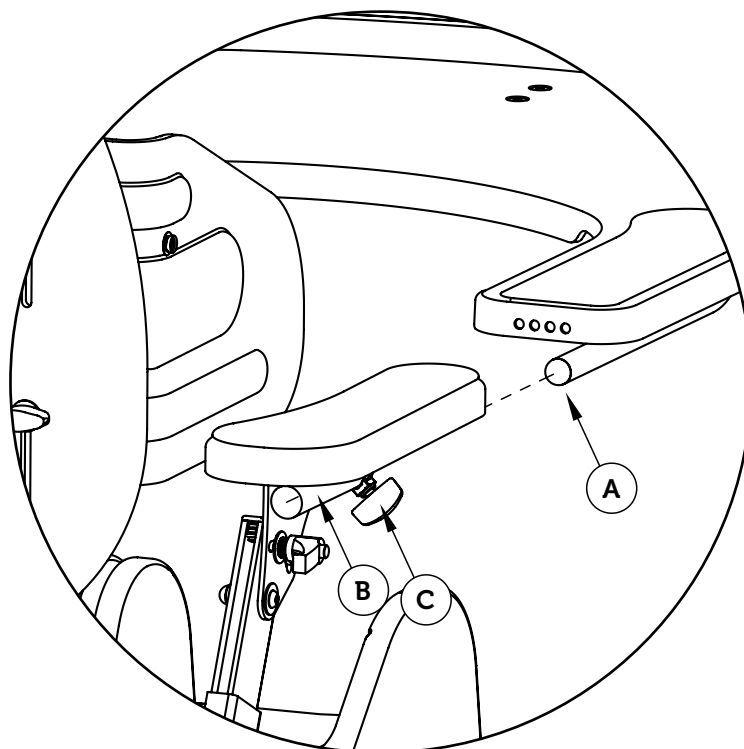

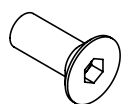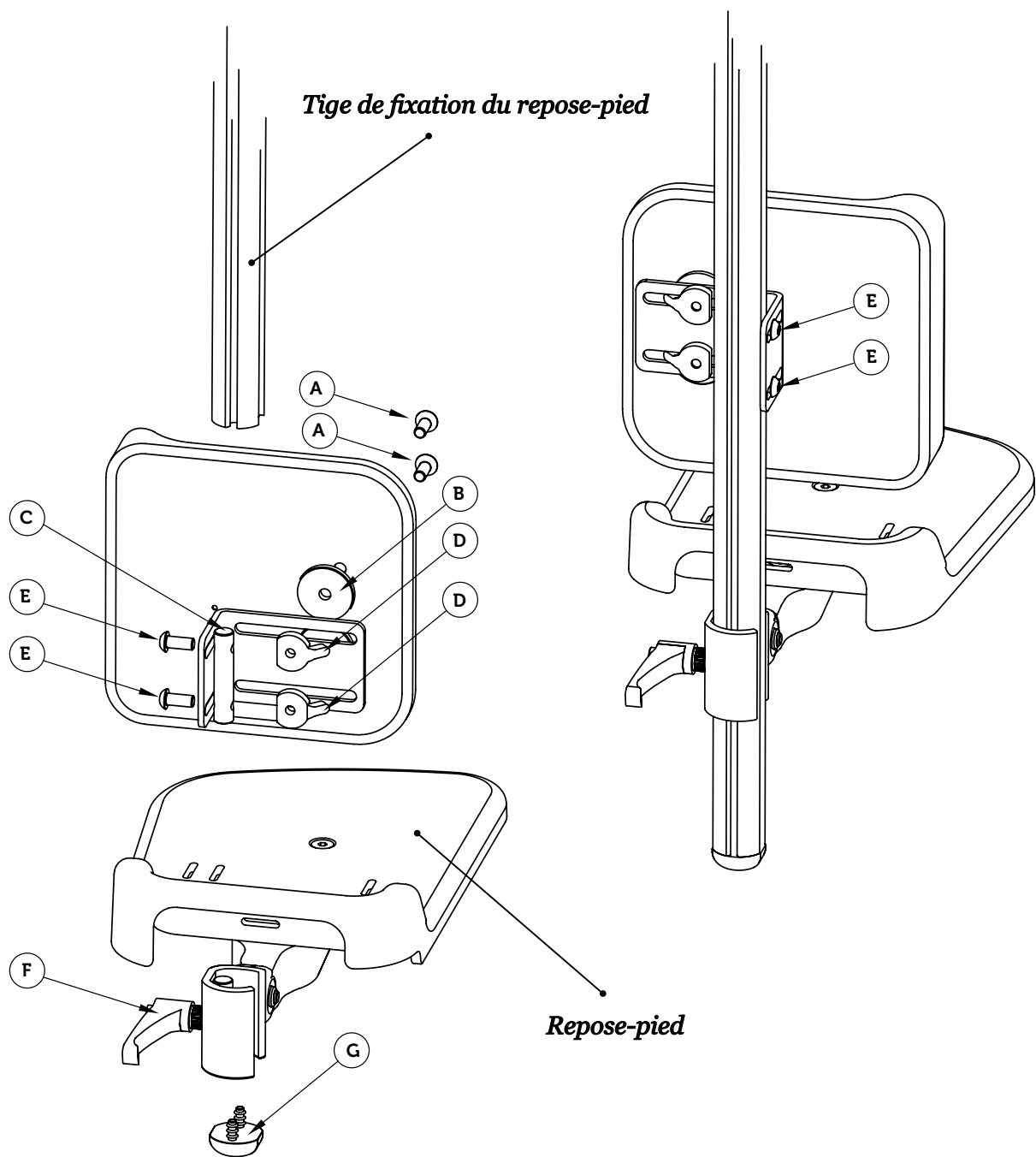


Vis M6 à tête plate
4 pcs

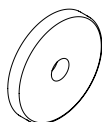


Rondelle épaisse (B)
4 pcs



Cylindre (C)
2 pcs

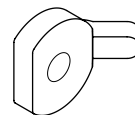

Écrou (D)
4 pcs

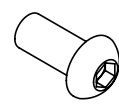

Vis M6 à tête ronde (E)
4 pcs

Repose-jambe

Montage des repose-jambes

Avant de monter le repose-jambe, vous devez enlever le repose-pied de la tige de fixation. Commencez par enlever l'embout (G), ensuite desserrez le levier (F) qui maintient le repose-pied sur la tige. Glissez le repose-pied vers le bas.

Montez le repose-jambe en faisant glisser le cylindre (C) dans les rails de la tige. Ajuster la hauteur, puis resserrez les vis (E). Remplacez le repose-pied et l'embout.

Conseil!

Pour plus de précisions concernant le montage des repose-pieds, veuillez consulter les pages 42 et 43 de ce manuel.

Régler la hauteur


Pour régler la hauteur du repose-jambe, desserrez légèrement les vis (E). Placez le repose-jambe à la hauteur souhaitée, puis resserrez les vis (E).

Régler la largeur

Pour régler la largeur du repose-jambe, desserrez légèrement les vis (E). Positionnez le repose-jambe selon la largeur souhaitée, puis resserrez les vis (E).

Remarque!

N'oubliez pas de fixer le repose-pied et l'embout après avoir monté le repose-jambe.

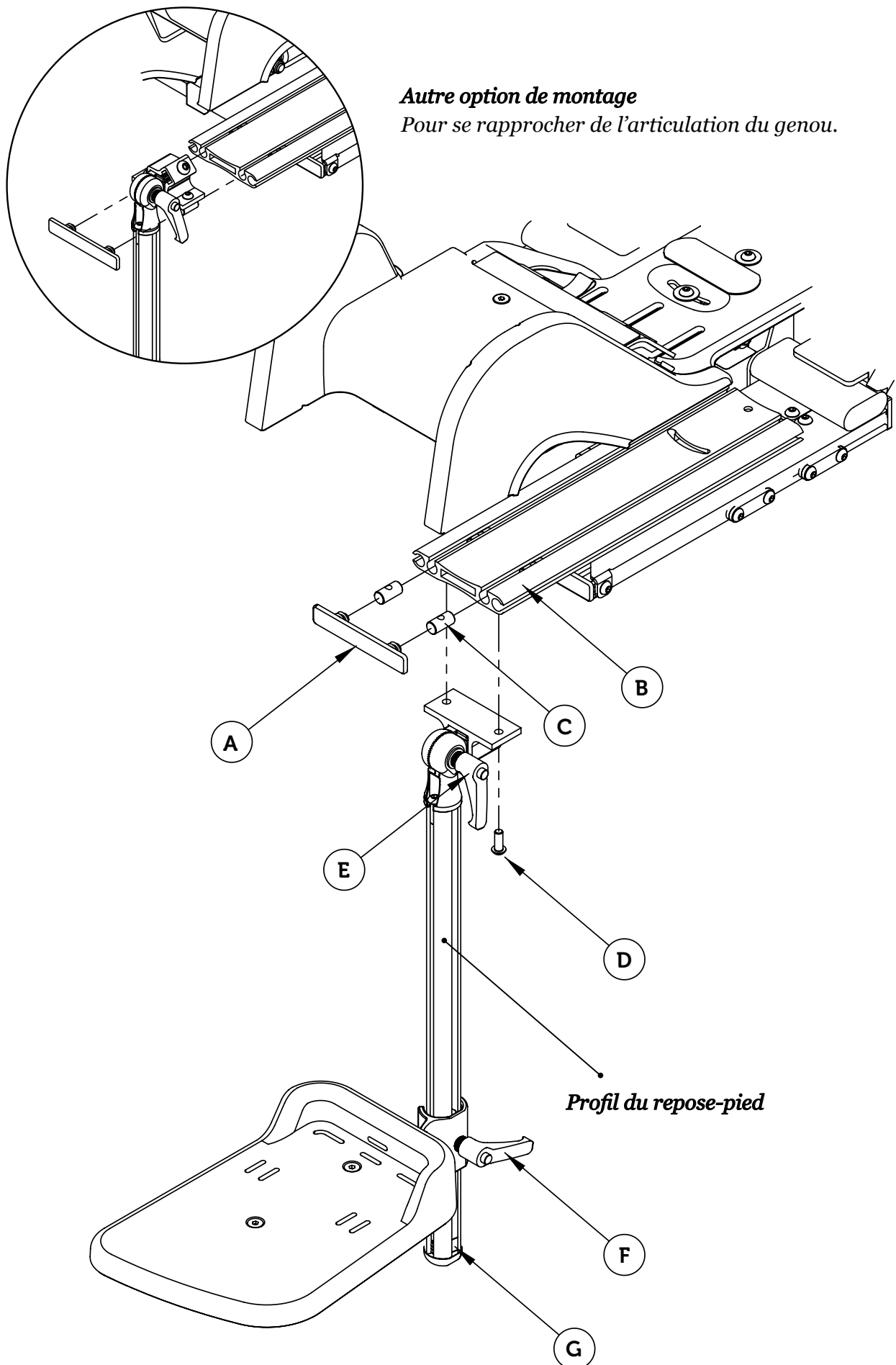

Repose-pied

Montage du repose-pied

Peu importe le modèle de repose-pied, le montage s'effectue toujours de la même façon. Commencez par enlever l'embout (A) de l'extrémité du profil inférieur (B), puis insérez les cylindres (C) de sorte qu'ils s'alignent avec les trous du profil inférieur (B). Ensuite, fixez le repose-pied avec les vis (D) dans les cylindres (C) à travers les trous du profil inférieur (B).

Autre façon de monter le repose-pied

Pour se rapprocher de l'articulation du genou, vous pouvez monter le support du repose-pied de l'autre côté du profil inférieur (B).

Remarque!

Sachez que vous ne devez pas démonter les gouttières du profil pour monter le repose-pied.

Butée de sécurité

La butée de sécurité (G) est une sorte de cylindre située en bas de la tige de fixation du repose-pied à l'intérieur de l'embout. La butée de sécurité (G) peut également être utilisée pour indiquer une autre hauteur de repose-pied.

Conseil!




Placez une autre butée de sécurité au-dessus du repose-pied afin de replacer facilement le repose-pied à une autre hauteur précise (par exemple, pour une position avec des chaussures, ou sans).

Régler l'angle du genou

Lorsque le repose-pied est monté, vous pouvez régler l'angle du repose-pied selon l'articulation du genou. Desserrez le levier (E) et ajustez l'angle. Resserrez le levier (E).

Régler l'angle de la cheville

Lorsque le repose-pied est monté, vous pouvez régler l'angle du repose-pied selon l'articulation de la cheville. Desserrez le levier (F) et ajustez l'angle. Resserrez le levier (F).

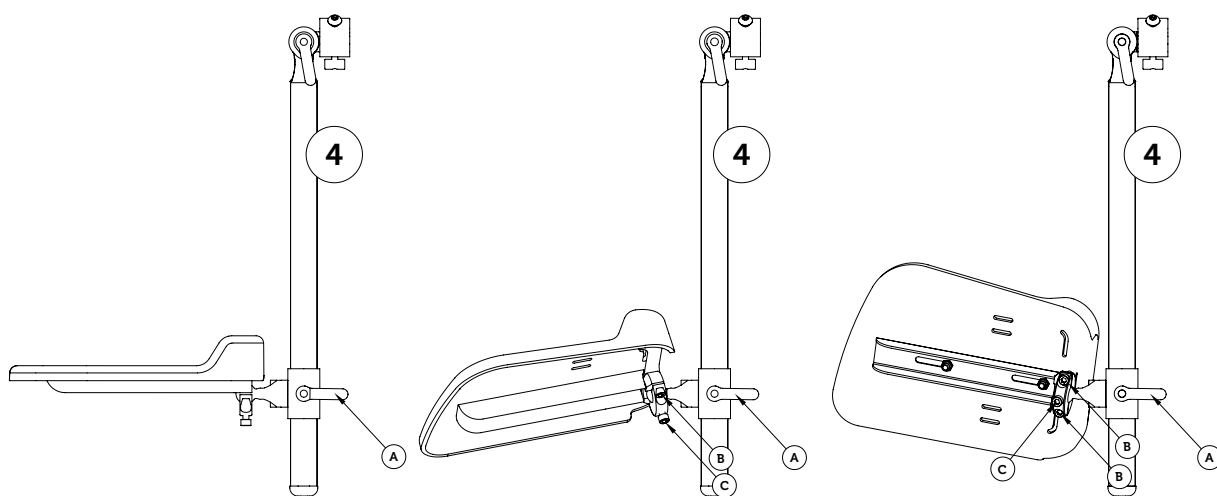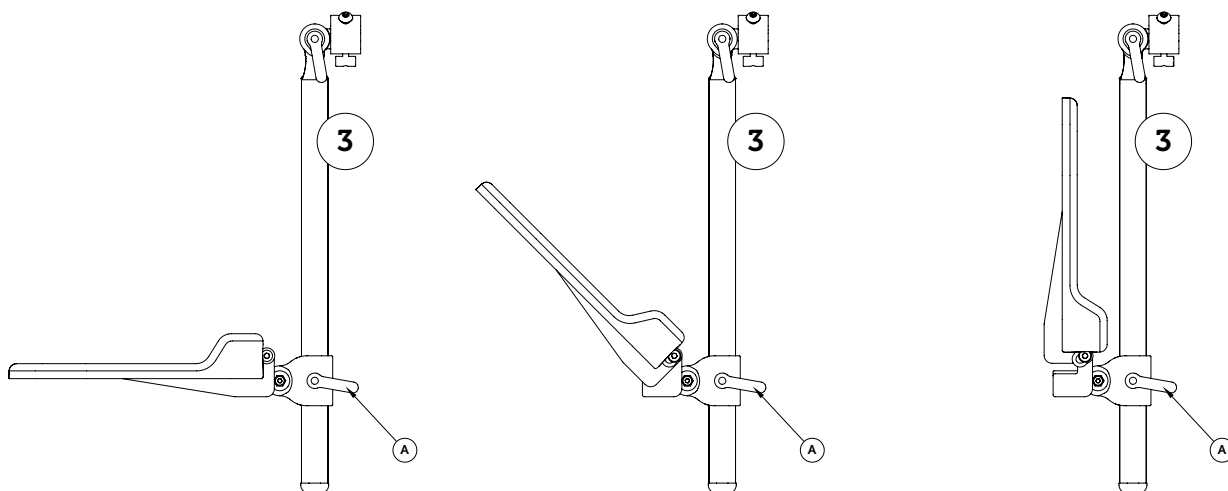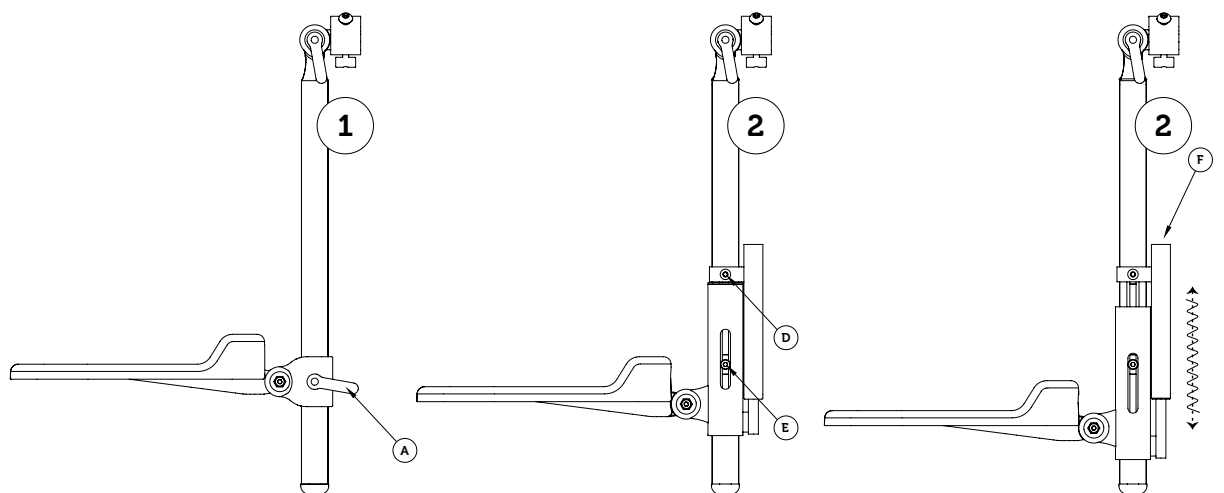

Supports des repose-pieds

Support de repose-pied fixe (1)

Pour régler la hauteur du repose-pied, desserrez le levier (A). Ajustez la hauteur, puis resserrez le levier (A).

Support de repose-pied flexible (2)

Pour régler la hauteur du repose-pied, desserrez la vis (D) et, si nécessaire, la vis (E). Réglez la hauteur, puis resserrez la vis (D). Modifiez la longueur du ressort en modifiant la hauteur de la vis (E), que vous resserrerez après la manoeuvre. Utilisez la vis (E) pour modifier l'amplitude du ressort en le maintenant dans la bonne position.

Conseil!

La résistance du ressort peut être réglée avec une vis dans le mécanisme du ressort (F).


Repose-pied repliable (3)

Pour modifier la hauteur du repose-pied, desserrez le levier (A). Amenez le repose-pied à la hauteur souhaitée puis resserrez le levier (A). Pour replier le repose-pied, tirez l'avant du plateau du repose-pied vers le haut.

Support articulé (4)

Pour modifier la hauteur du repose-pied, desserrez le levier (A). Ajuster la hauteur, puis resserrez le levier (A).

Pour modifier le dispositif avec l'articulation, desserrez d'abord les vis (B) et (C), puis placez le repose-pied dans la position souhaitée. Resserrez les vis (B) et stabilisez la position à l'aide de la vis (C).

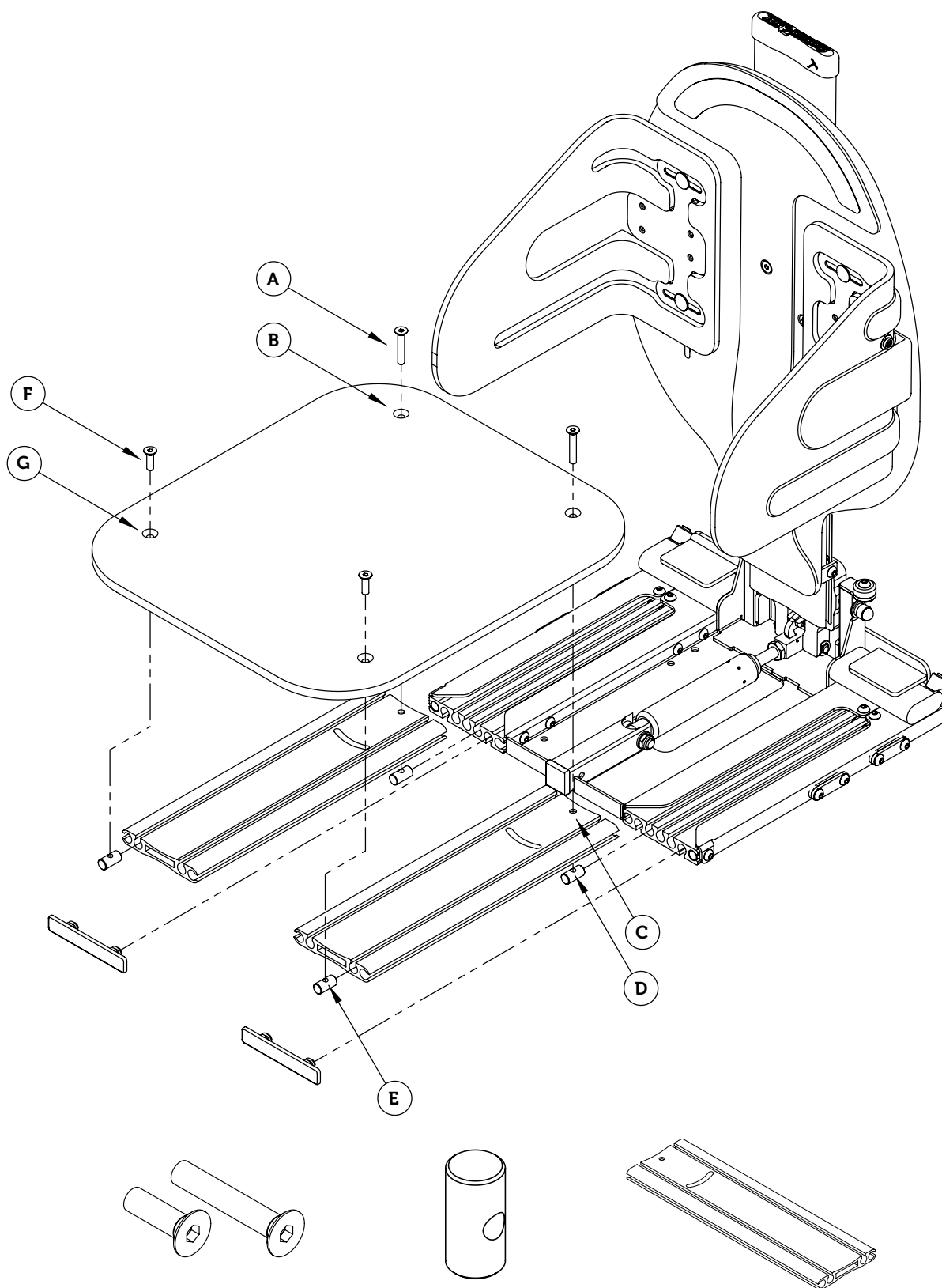

Siège plat

Montage du siège plat

Si vous souhaitez monter le siège plat, vous devez d'abord enlever les gouttières. Servez-vous du matériel de montage fourni pour monter le siège plat, et suivez les instructions qui suivent.

Quand vous montez le siège plat, les vis longues (A) doivent passer à travers les trous du plateau du siège situés à l'arrière (B) ainsi qu'à travers les trous du profil (C).


De l'autre côté, fixez-y les cylindres (D), mais pas tout à fait. Insérez les cylindres (E) dans les fentes aux extrémités des profils et vissez-y les vis (F) à travers les trous (G).

Faites glisser les cylindres montés au plateau du siège dans le rail 1 de la base du siège (Voir page 12), puis resserrez les vis (A) une fois la position souhaitée obtenue.



Remarque!

N'utilisez jamais d'autres vis que celles fournies. Ces dernières présentent, en effet, certaines caractéristiques de sécurité. Si vous avez besoin d'autres dimensions, veuillez contacter Anatomic SITT AB.

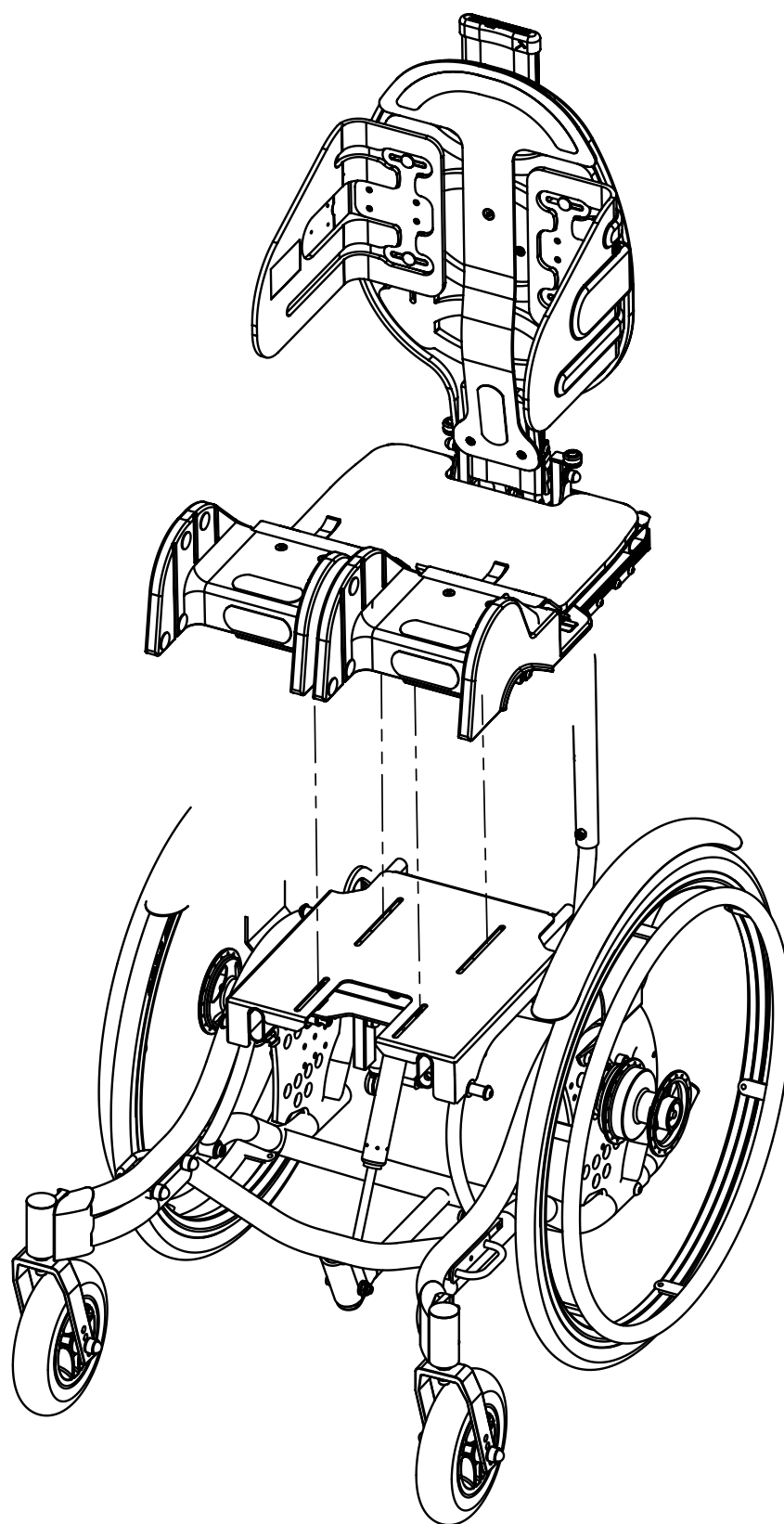

Monter le dispositif d'assise sur un cadre

Montage sur un cadre

Il existe deux façons différentes de monter le siège sur un cadre. Les explications qui suivent présentent les différentes options. Choisissez celle qui convient le mieux.

Montage fixe

Le montage fixe signifie que le dispositif est fixé directement au cadre. Le montage avec cette méthode doit être effectué avec le kit de montage fourni. En bas du dispositif d'assise, se trouvent deux configurations différentes de trous pour la fixation au cadre. Choisissez la configuration qui convient le mieux, afin que le montage soit bien équilibré.




Remarque!


N'utilisez jamais d'autres vis que celles fournies. Ces dernières présentent, en effet, certaines caractéristiques de sécurité. Si vous avez besoin d'autres dimensions, veuillez contacter Anatomic SITT AB.

Remarque!


Si vous utilisez un siège plat, celui-ci doit d'abord être enlevé avant le montage sur un cadre.

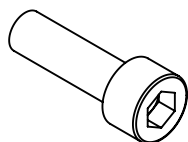


Vis M6 (A)
4 pcs

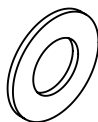

Rondelle M6 (B)
4 pcs

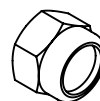

Contre-écrou M6 (C)
4 pcs

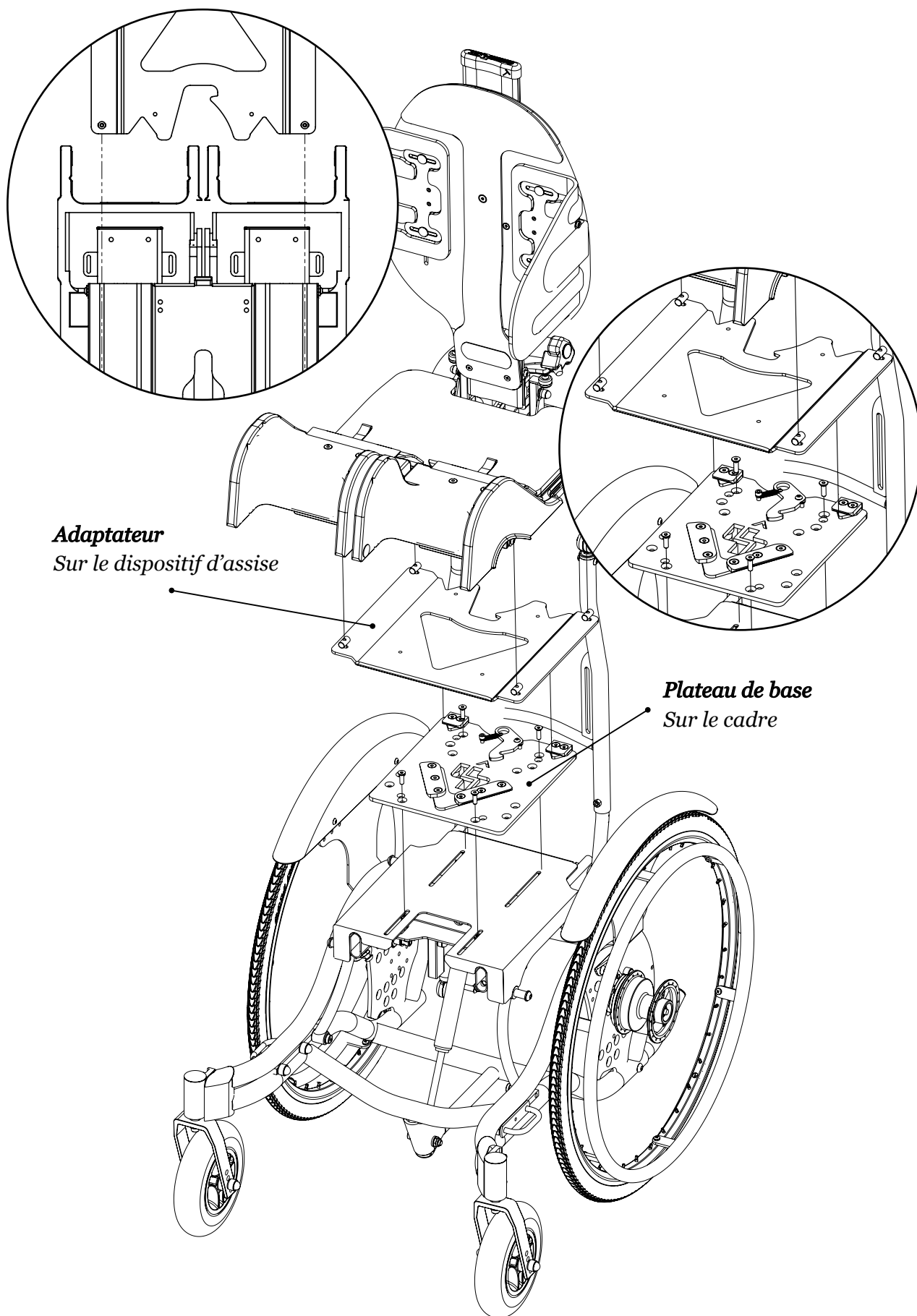

Monter le dispositif d'assise sur un cadre

Montage sur un cadre

Il existe deux façons différentes de monter le siège sur un cadre. Les explications qui suivent présentent les différentes options. Choisissez celle qui convient le mieux.

Montage avec un système d'adaptation

Le système d'adaptation permet de pouvoir changer plus facilement de cadre. Le système d'adaptation comprend un adaptateur sur le dispositif d'assise et un plateau de base sur chaque cadre.

Commencez par monter le plateau de base sur le cadre en le fixant avec les vis, les rondelles et les contre-écrous fournis.


Ensuite, montez l'adaptateur en le faisant glisser dans les cylindres (A) dans les rails aux extrémités de la base du siège. Fixez-le avec les vis (B) lorsque la position convient.

Quand les deux éléments sont montés, ceux-ci peuvent coulisser l'un sur l'autre. Le dispositif d'assise est correctement fixé une fois que vous avez entendu le « clic ».




Remarque!

Vérifiez que le dispositif d'assise est correctement fixé au cadre avant utilisation.

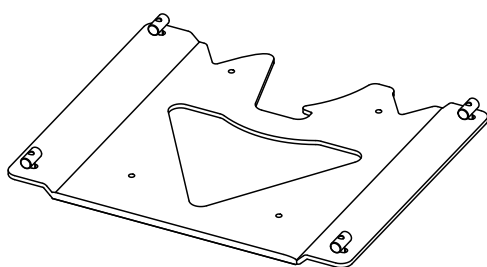

Plateau d'adaptation

Fixé au dispositif d'assise

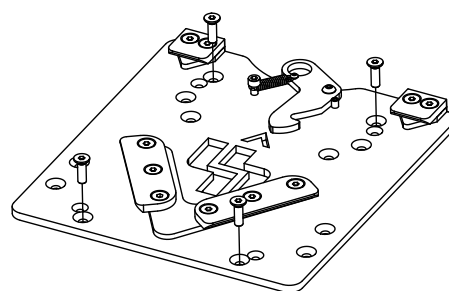

Plateau de base

Fixé au cadre

Transport dans un véhicule

Instructions pour le transport en voiture


Si vous souhaitez transporter le Sharky Pro monté sur un cadre, veuillez suivre les instructions spécifiées par le fabricant du cadre.

Si le Sharky Pro est monté sur un Seabass Pro, le cadre doit être fixé dans les supports de transport prévus à cet effet, comme indiqué ci-dessous.



Remarque!

Il est important de ne pas trop serrez les sangles, sinon le cadre risque de se tordre.

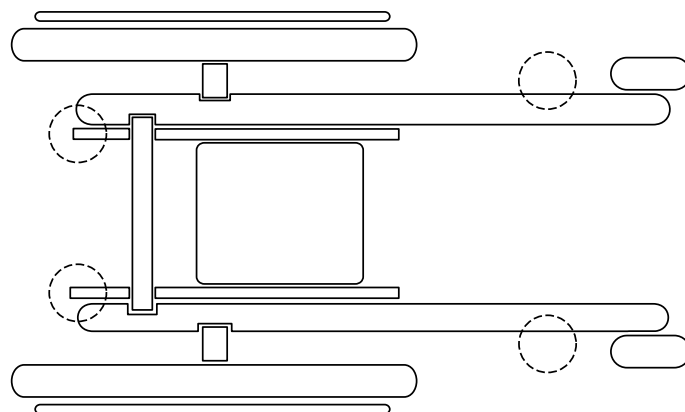

Crash test : testé et approuvé

Le Zitzi Sharky Pro a été soumis à un crash test et est conforme à la norme ISO 16840-4. Ce standard témoigne que le dispositif d'assise peut être monté sur tous les cadres conformes à la norme ISO 7176-19, afin que les combinaisons restent toujours conformes aux normes.

Remarque!

Le crash test a été validé pour des utilisateurs ayant un poids ne dépassant pas les 75kg.



Service clientèle

Scandinavia

SE

Anatomic SITT AB

Box 6137, SE-600 06 Norrköping
Stohagsgatan 26, SE-602 29 Norrköping
Tel. +46 11 161800, Fax +46 11 162005
Email info@anatomic-sitt.com

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, DK-8240 Risskov
Tel. +45 861 701 74, Fax +45 861 701 75
Email a-sitt@anatomic-sitt.dk

FI

Handico Finland OY

Turkkirata 28, FIN-33960 Pirkkala
Tel. +358 331 222 700, Fax +358 331 222 710
Email handico@handico.fi

NO

Bardum AS

Håndversveien 8, N-1405 Langhus
Tel. +47 64 91 80 60, Fax +47 64 91 80 66
Email post@bardum.no

Europe

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Sir Rowland Hillstraat 1C, NL-4004 JT Tiel
Tel. +31 344 63 45 40, Fax +31 344 62 33 61
Email informatie@anatomic-sitt.com

MLT

Be Independent Ltd

St Luke's Road G'Mangia PTA MLT-1027
Tel. +356 214 662 66, Fax +356 214 656 70

GBR

Consolor Ltd Unit A3

The Forelle Centre, Black Moor Road, Ebblake
Industrial Estate, Verwood, Dorset, BH31 6BB
Tel. +44 120 282 76 50, Fax +44 133 273 02 33

NZL

Cubro Rehab

PO Box NZL-9144, Tauranga
Tel. +64 757 78 816, Fax +64 757 78 827

GR

HandiTech Scandinavian Reha Aids Center

11 G Seferi Str. GR-542 50 Thessaloniki
Tel. +302 310 324 114, Fax +302 310 324 054
Email info@handitech.gr

EST

Invaru Ltd

Peterburi tee 14A, EST-114 11 Tallin
Tel. +372 621 25 82, Fax +372 638 08 78

IRL

MMS Medical Ltd

51 Eastgate Drive, Little Island, Cork
Tel. +353 021 461 8000, Fax +353 021 461 8099

PRT

Mobilitec

Rua dos Verdes 123, PRT-4470-658 Pedras
Tel. +351 229 436 130, Fax +351 229 436 139

FR

OX Orthopédix

27 rue François Gillet, FR-42400 St. Chamond
Tel. +33 477 195 994, Fax +33 426 303 789

IT

Ortopedia Castagna Centro Tecnico

Via Ghislanzoni 18/B, IT-23900 Lecco
Tel. +39 341 362 671, Fax +39 341 360 931

CH

Rehatec AG

Ringstrasse 15, CH-4123 Allschwill
Tel. +41 614 879 911, Fax +41 614 879 910

IS

Stod Hf Stoaekjadmíðin

Tronuhraun 8, IS-220 Hafnarfjörður
Tel. +354 565 2885, Fax +354 565 1423

GR

Scan Ideal

28, Tzavela Str. GR-542 49 Thessaloniki
Tel. +302 310 320 150, Fax +302 310 350 151

SVN

Team Nova Reha

Gerecja vas 33, SVN-2288 Hajdina
Tel. +386 278 201 06, Fax +386 278 201 06

ES

Via Libre Fundosa Accesibilidad

Don Ramon de la Cruz 38, ES-28001 MADRID
Tel. +34 911 213 031, Fax +34 911 213 025

Asia Pacific and Middle East

UAE

Al Safwa Mobility LLC (ASM)

Al Falah Street Harley Davidson, 2001, Abu Dhabi
Tel. +971 264 242 62, Fax +971 264 242 63
Email info@alsafwamobility.ae

AUS

Paediatric Mobility Equipment

Po Box 1118, Young, AUS-NSW259
Tel. +61 1300 131 884, Fax +61 1300 884 010
Email sales@paedmobility.com.au

ISR

Special needs for Special children

48 Mordey Hagetaot St. Beer Sheva, ISR-84840
Tel. +972 8 62 875 85, Fax +972 862 819 61

MYS

The Gym & Care

1F-23 & 24, IOI Business Park, MYS-47100 Puchong
Tel. +603 8070 9166, Fax +603 8073 9166
Email info@gymncare.com

Instructions d'entretien

Intervalles entre les entretiens

Afin que le dispositif fonctionne correctement, il est important d'effectuer des entretiens et des inspections régulièrement. La fréquence des entretiens dépend de la fréquence d'utilisation et de l'usure du dispositif. Contrôlez toutes les pièces mobiles et les éléments sensibles à l'usure. Les entretiens doivent toujours être effectués par des professionnels et du personnel qualifié. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à contacter Anatomic SITT AB.

Instructions de nettoyage et de lavage

Les éléments en plastique et en métal peuvent être frottés avec un chiffon humide ou nettoyés avec un liquide anti-bactérien ou des produits similaires. Pensez à l'environnement : utilisez des détergents biodégradables.

Les coussins, les tissus et les ceintures peuvent être nettoyés à 60°, à un programme délicat et ne doivent pas être séchés au sèche-linge, mais dans une armoire à séchage. Suivez les instructions de nettoyage sur les étiquettes. Ces règles de nettoyage valent également pour le harnais de sécurité et la ceinture de hanches d'Anatomic SITT AB.

Vérifiez régulièrement l'état du dispositif et effectuez un entretien quand c'est nécessaire.

Le vérin à gaz doit être activé régulièrement

Le vérin à gaz doit être activé régulièrement afin qu'il puisse toujours fonctionner correctement. Si le fauteuil n'est pas utilisé, le vérin doit être activé au moins une fois tous les six mois. En outre, le fauteuil devra être rangé tige du vérin vers le bas, afin d'éviter que le vérin à gaz ne fuie et devienne alors inutilisable.

Outils

L'outil dont vous avez besoin (une clé hexagonale de 4mm) pour effectuer les réglages se trouve au dos du fauteuil au niveau du repose-tête.

Garantie

La garantie pour les défauts de fabrication est d'un an. Pour plus d'informations concernant la garantie, voir page 58 de ce manuel.

Combinaisons

Le Zitzi Sharky Pro et ses accessoires sont des produits marqués « CE » et peuvent être combinés avec tous les accessoires décrits dans ce manuel. Le Zitzi Sharky Pro convient à un usage en combinaison avec le Zitzi Flipper Pro, le Zitzi Seabass Pro, le Mika et le Flizzy. Pour d'autres combinaisons, veuillez contacter Anatomic SITT AB.

Pièces de rechange

Pour que le marquage « CE » du Zitzi Sharky Pro soit valide, les éventuelles pièces de rechange doivent être fournies par Anatomic SITT AB.

Remise en état

La remise en état du fauteuil ne peut être effectuée qu'avec des pièces fournies par Anatomic SITT AB.



Remarque!

Vérifiez toujours que le produit ne contient aucun élément fait sur mesure avant qu'il ne soit remis en état pour un autre utilisateur.

Marquage

Le Zitzi Sharky Pro et ses accessoires sont des produits marqués « CE ». Un numéro de série unique se trouve sur l'étiquette située près du vérin à gaz dans le siège. Ce numéro de série doit être mentionné dans chaque communication concernant le produit.

Recyclage

Un élément ou un produit utilisé doit être démonté et jeté. Les éléments doivent être triés selon le type de matériel : métal, plastique et combustible (textiles). Le vérin à gaz fait partie des déchets dangereux.

Récapitulatif et suivis

Examens de contrôle

Verifiez toujours chacun des points suivants avant que l'utilisateur ne s'installe dans le fauteuil.

- Exécutez régulièrement les suivis décrits dans chaque point.
- Vérifiez régulièrement que les vis sont correctement fixées.
- Vérifiez régulièrement l'usure des sangles et des coussins.
- Ne placez l'enfant qu'une fois que vous avez entendu le « clic » lors du montage du siège sur la partie inférieure..
- Ne penchez pas trop le siège vers l'avant lorsque l'enfant est installé.

Adaptation et sur-mesure

Lignes de conduite et recommandations

Chaque fois que le Sharky pro fait l'objet de retouches, il faut vérifier si celles-ci sont de l'ordre de l'adaptation ou du sur-mesure.

Une adaptation consiste en une modification de la composition du système d'assise qui reste dans le domaine du marquage « CE ». Toutes les autres modifications tombent sous le terme de sur-mesure. Les adaptations ne doivent être exécutées que par une personne considérée comme étant qualifiée pour ce travail, et doivent toujours être réalisées de façon professionnelle. Le marquage « CE » signifie que le produit est conforme aux normes de sécurité européennes.

Si les modifications à apporter relèvent de l'aide médicale, une évaluation des risques doit toujours avoir lieu, aussi bien pour une adaptation que pour du sur-mesure. Le produit ne doit en aucun cas représenter un danger après une adaptation.

Le produit doit posséder une note signalant que le fauteuil a été ajusté aux besoins d'un certain utilisateur, afin que le dispositif ne soit pas confondu avec un produit standard.

Adaptations autorisées pour le Sharky Pro

Sachez que si les modifications à apporter relèvent de l'aide médicale, une évaluation des risques doit toujours avoir lieu, aussi bien pour une adaptation que pour du sur-mesure. Le produit ne doit en aucun cas représenter un danger après une adaptation.

Remonter les repose-pieds

Les repose-pieds peuvent être remontés si nécessaire.

Raccourcir les accoudoirs (accoudoirs à partir du siège)

Les accoudoirs peuvent être raccourcis si nécessaire. Le profil ne peut être raccourci qu'à la base (en direction du siège) et des trous M5 doivent être forés et taraudés pour les embouts de sécurité. Ces trous doivent être forés afin que les embouts de sécurité puissent être montés dans le rail du profil à une distance minimale de 10 mm à partir de l'extrémité du profil.

Redescendre le dossier

Le dossier peut être redescendu si nécessaire. Le profil ne doit jamais être trop petit : tous les supports du dossier doivent pouvoir être montés. De plus, il doit toujours y avoir 10 mm entre l'extrémité du profil et le bord de la molette du support lombaire.

Conditions de vente

Garantie

La garantie contre les défauts de fabrication est valable pendant un (1) an à partir de la date de livraison. La garantie s'annule lorsque le produit a été exposé à des facteurs extérieurs ou manipulé de façon incorrecte. Il est nécessaire que le produit faisant défaut soit retourné afin que nous puissions traiter la demande de garantie. Envoyez toujours la fiche de colisage que vous avez reçu avec le dispositif.

Système de garantie

Décrivez le problème et son éventuelle cause de façon aussi détaillée que possible. Réclamez des réparations ou un éventuel remplacement sous garantie. Annexez toujours une copie de la facture et exigez que le produit vous soit retourné après réparation. Indiquez une adresse de livraison ainsi qu'un numéro de téléphone.

Assurez-vous d'avoir bien emballé le produit de façon à ce qu'il soit protégé lors du transport. Assurez-vous d'avoir bien conservé le numéro d'expédition afin de pouvoir tracer votre colis lors du transport.

Retourner le produit

Dans le cas d'erreur de commande ou de livraison, le produit doit être renvoyé dans les 20 jours après la réception. Annexez toujours une copie de la fiche de colisage et de la facture. Indiquez les raisons pour lesquelles vous retournez le(s) produit(s).

Assurez-vous d'avoir bien emballé le produit de façon à ce qu'il soit protégé lors du transport. Assurez-vous d'avoir bien conservé le numéro d'expédition afin de pouvoir tracer votre colis lors du transport.

Les produits retournés au-delà de 20 jours après la livraison

seront remboursés pour une valeur de 80% de la facture.

Les produits retournés au-delà de 60 jours après la livraison

seront remboursés pour une valeur de 60% de la facture.

Les produits retournés au-delà de 150 jours après la livraison


seront remboursés pour une valeur de 40% de la facture.

Les produits retournés au-delà de 360 jours après la livraison

ne seront pas remboursés.

▲ Les produits sur-mesure ne peuvent être retournés

Données techniques

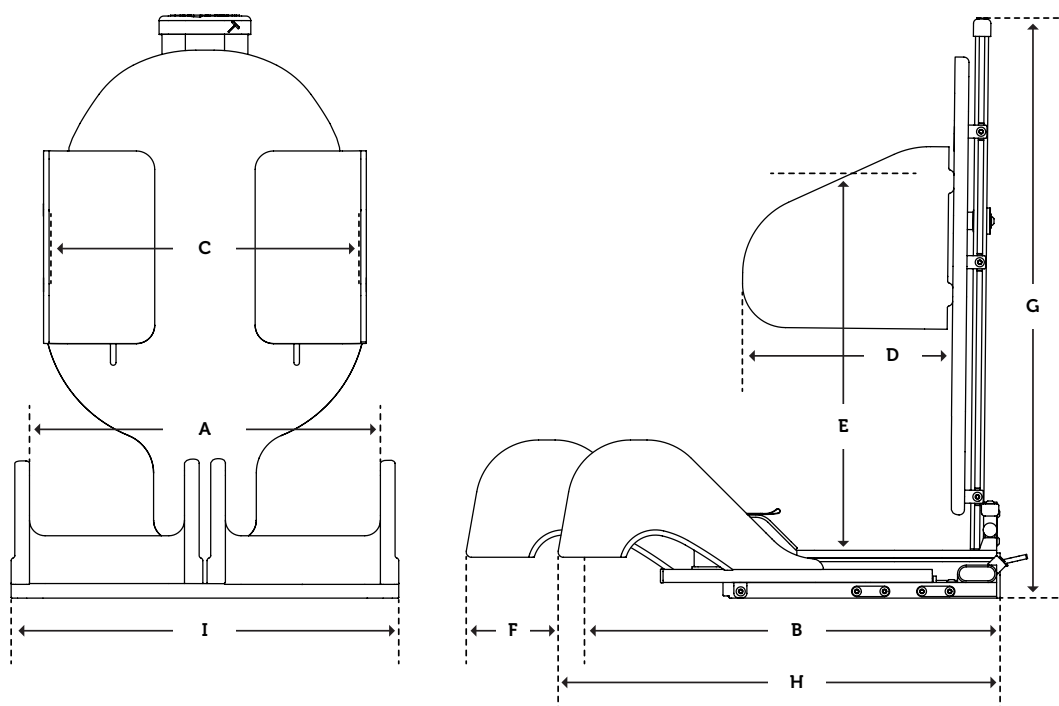

Données de l'utilisateur	Taille 1	Taille 2
Taille de l'utilisateur	150–180 cm	170–195 cm
Largeur du siège (A)	36, 39, 42 cm	43, 46, 49 cm
Profondeur du siège (B)	37–47 cm	45–55 cm
Largeur latérale (C)	27–35 cm	30–38 cm
Profondeur latérale (D)	21 cm	25 cm
Hauteur d'aisselle (E)	35–50 cm	40–55 cm
Longueur de jambes (F)	10 cm	10 cm
Abduction/Adduction	18° / 9°	18° / 9°
Données du produit	Taille 1	Taille 2
Largeur de l'utilisateur	130 kg*	130 kg*
Hauteur (G)	67 cm	77 cm
Longueur (H)	52–62 cm	62–72 cm
Largeur (I)	43, 46, 49 cm	50, 53, 56 cm
Poids	14 kg	
Angle du dossier	-10° / +25°	-10° / +25°

* Approbation Crash test est valable pour les poids jusqu'à 75 kg.

SE

Anatomic SITT AB (manufacturer)

Box 6137, SE-600 06 Norrköping, Sweden

Tel +46 11 16 18 00

Fax +46 11 16 20 05

Support +46 11 16 18 05

Street address

Terminalgatan 1, SE-603 61 Norrköping, Sweden

DK

Anatomic SITT A/S

Viengevej 4, 8240 Risskov, Denmark

Tel +45 86 17 01 74

Fax +45 86 17 01 75

NO

Bardum AS

Håndverksveien 8, N-1405 Langhus, Norway

Tel +47 64 91 80 60

Fax +47 64 91 80 66

NL

Anatomic SITT Nederland BV

Postbus 6027 / 4000 HA Tiel, Netherlands

Tel +31 344 63 45 40

Fax +31 344 62 33 61

World wide

anatomicsitt.com

info@anatomicsitt.com

facebook.com/anatomicsitt

youtube.com/anatomicsitt

